

ORTHOSIS



足関節・足趾・ 足底板

装具部品・半製品サポート

Ankle

Digiti pedis & Arch


Nintoku Corp

カーボン製 短下肢装具

"WalkOn®" ウォークオン シリーズ

- ウォークオン (28U11) 完成用部品
- ウォークオン トリマブル (28U23)
- ウォークオン リアクション (28U24)
- ウォークオン リアクション ジュニア (28U25)

ウォークオン トリマブル (28U23)

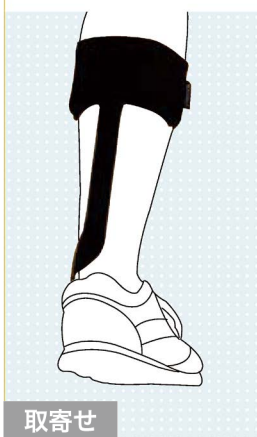

目立ちにくいデザイン

内側から立ち上がった支柱は、ふくらはぎの後方を走行し、正面からは目立ちにくいデザインとなっています。

足底部が薄く、多くの靴に対応しやすくなっています。また、インソールを併用していただくことにより、快適なフィット感で歩行していただけます。

取寄せ

ウォークオン リアクション (28U24)



高い支持性

下腿を支える前面支持部が膝伸展筋の機能をサポートします。ウォークオン トリマブル (28U23) に比べ、より大きな反発力を生み出し、歩を進めやすい構造になっています。

アライメント調整

標準で付属している補正用ウェッジ(次ページ③)を加工、使用することで、下肢のアライメント調整をおこなえます。

取寄せ

ウォークオンリアクション ジュニア(28U25)



ウォークオン リアクションに KIDS サイズ登場

カーボンのたわみと反発力

カーボン素材でできた足底部のたわみ・反発力は自然な踏み返しを補助します。

立脚後期では背屈制動をするとともに、つま先離れの際の反発力を生み出します。


反発力は推進力となり、滑らかに次の一步を踏み出すことができます。

取寄せ



たわみ・反発力

カーボン素材でできた足底部のたわみ・反発力は自然な踏み返しを補助します。つま先離れの時には、反発力は推進力となり、滑らかに次の一步を踏み出すことができます。

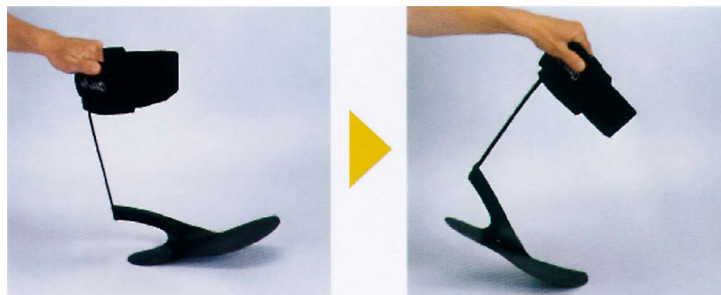

軽量性

カーボンは耐久性に優れ、とても軽量の素材です。

※カフバンド含む S サイズの重量


・トリマブル 約 170g

・リアクション 約 210g

・リアクション ジュニア 約 90g

簡単トリミング

足底部にひと回り大きいゴム底をつけることで、ハサミなどでトリミングを行っていただけます。作業にはグラインダーなどの工作機を使わないため作業時間を短縮することができます。
※ 28U11 ウォークオンにはゴム底がないため調整には切削作業が必要となります。

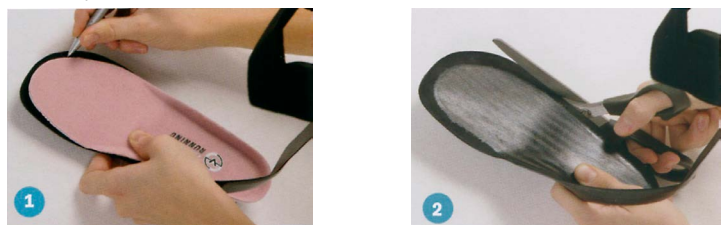

滑り止め足底ゴム

装具足底部分には足底ゴムがついています。

靴の中で装具をすべりにくくし、ズレを防ぎます。



ウォークオン トリマブル (28U23)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U23=R36-39-SHORT		S-SHORT	22.5 ~ 24.0	32
28U23=R36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U23=R39-42	右	M	24.0 ~ 26.5	36
28U23=R42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U23=R45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39
28U23=L36-39-SHORT		S-SHORT	22.5 ~ 24.0	32
28U23=L36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U23=L39-42	左	M	24.0 ~ 26.5	36
28U23=L42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U23=L45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39

※ 28U11 ウォークオンは 28U23 と同サイズとなります (S-SHORT の規格はありません。)



ウォークオン リアクション (28U24)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U24=R36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U24=R39-42	右	M	24.0 ~ 26.5	36
28U24=R42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U24=R45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39
28U24=L36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U24=L39-42	左	M	24.0 ~ 26.5	36
28U24=L42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U24=L45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39



ウォークオンリアクション ジュニア (28U25)


発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U25=R24-27		S	16.0-18.0	20.5
28U25=R27-30	右	M	18.0-20.0	24.5
28U25=R30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=R33-36		XL	22.0-24.0	29.4
28U25=L24-27		S	16.0-18.0	20.5
28U25=L27-30	左	M	18.0-20.0	24.5
28U25=L30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=L33-36		XL	22.0-24.0	29.4



※サイズは普通の靴サイズを目安にし、装具高さを確認して選択して下さい。
 ※計測値が2サイズにまたがる場合は、装具高さを考慮してお選びください。
 ※XL はドイツ取寄せのため通常3~4週間いただきます。

側方回内牽引パーツについて

(発注品番 28Z10/28Z10=1 左右兼用)
 このパーツを用いることにより、装具との一体感を高めることができます。
 薄手の素材は靴を履いたときの不快感を最小限に抑えます。

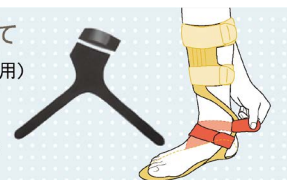

アドバンフィット (株)



軽量
簡単装着
快適な装着感

下垂足 (Drop foot)
軽度の内反・尖足に

UD フレックス AFO

適応： 中枢神経麻痺患者で下肢の変形（内反、尖足）が軽度の足部。

足部の皮膚からの固有感覚の刺激を必要としている患者。

末梢神経麻痺で内反足、下垂足の足部。

特徴： 軽く目立たちにくい。(約 60g)

ベルト1本で片手での装着が簡単。

U字型前方のカットラインにより、背屈しゃがみ動作が可能。

うすく、フレキシブルなため、装着感が良い。

足底部が大きくあいているため、足底からのフィードバックがよく得られる。



UD フレックス AFO ロングタイプ



- U字型前方のカットにより、背屈が容易でよりスムーズな歩行が得られる。また、しゃがみ動作も可能。
- 内反、尖足矯正も確実。

旧サイズ	新サイズ	足部甲周り周径 (cm)
S	1	20.5 - 22.0
M	2	22.0 - 23.5
ML	2.5	23.5 - 25.0
L	3	25.0 - 26.0
XL	4	26.0 - 27.0
XXL	5	27.0 - 28.0

(左右別)

SPS-AFO (TOMEI BRACE)

特徴： RAPS の概念と同じく、後方平板支柱構造により装具運動方向性を確保
 平板支柱部のフランジ加工により、背屈は撓みやすく、底屈は適度の制動力を確保
 足関節の初期背屈角度は約 7 度に設定
 遊脚期の底屈背限のみでなく、立脚期の内外反抑制、背屈補助モーメントを発生
 従来型の装具に比較して、立脚期に有効、特に内外矯正に有効
 足関節内外果、舟状骨などに干渉しにくい設計・デザイン
 足底先端は MP 骨頭遠位まで支持可能



適応

- 麻痺性疾患による足部下垂
- 中～軽度の痙性麻痺
- 中～軽度の内反尖足

サイズ (左右有)	S - M	M - L
足長 (cm)	22 ~ 24.5	24.5 ~ 27

Go-on ゴーオン ottobock.

軽い力で下垂足をサポート

ゴーオンは下垂足の方が、つまづくことなく前に歩み続けられるように開発されました。



前面支持式なので、踵・足底面があいており、靴での装着もしやすいという利点があります。(ひも靴推薦) 足部遠位に足部保持のためのストラップが付いているので、室内での使用も可能になっています。また、背屈保持を主目的とし内外反の動きは防げませんので、持っている機能を制限せずに歩行できます。

足部を支えるための支持部にはワイヤー状のバネ鋼を内蔵しており、しなやかな動きを再現できます。



前面支持

バネ鋼

取り外し可能なソフトカバー

用途：軽度下垂足・足部保持

サイズ：フリー 左右兼用

DYNAMIC AFO

短下肢装具 ダイナミックAFO

適応：下垂足・軽度内反尖足に対する背屈保持（底屈制動）装具です。

特徴：歩行時における足関節の可動域を制限せず、ゴムバンドの張力による底屈制動の考えを取り入れた短下肢装具です。

※ 通常歩行のメカニズムをシンプルなフォルムで再現。足関節の動作を妨げず、歩行時の自然な動きを生み出します。



S	M	L
~ 23.0	23.5 ~ 25.0	25.5 ~

フットナビ

トクダ オルソ テック




装着例

規格 : フリーサイズ
 サイズ : 縦 200× 横 300× 巾 100
 質量 : 150g

足関節良肢位保持具

- 長期臥床による足関節の不良肢位を予防します。
- 尖足でも装着可、内外旋コントロールも可能です。
- 従来品と比較して確実な良肢位固定が可能になりました。
- 半側臥位、側臥位でも装着が可能です。
- 前面装着により褥創予防の管理に最適です。
- 装着方法が簡単。本体は軽量で装着感も良好。

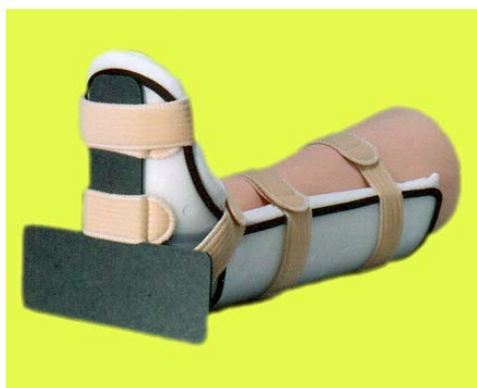

フットボード		アルケア
サイズ 左右兼用	フリーサイズ	白
		13-04
尖足予防用副子		併売
ベッドサイドの尖足予防・下肢固定に		

(AD) アキレス腱用 AFO

アキレス腱断裂・術後

およびキャスト後の管理に

特徴：

- 底屈位での安全な固定、荷重歩行が可能です。
- 4枚のウレタンウェッジにより10°毎の角度調整が容易にできます。
- ユニークなロッカー底のデザインにより正常に近い踏み返しができます。
- 高力アルミ合金のシェルにより、強度と安定性があります。
- 日本人の体型に適合するように改良を加えています。

・支柱（内外果部）広げ修正（サイズ0.1.2のみ）

・足部甲のベルト位置を上部に移動

・下腿部パッドの大きさ修正、通気穴加工、マジックパイル補強

・後面プレート下部（アキレス部）のカット

・室内用ナイトカバーを全装備

旧サイズ	新サイズ	適用(足長 cm)	重量 (g)
XS	0	18.0 - 22.0	1,100
S	1	22.5 - 24.5	1,280
M	2	25.0 - 27.0	1,460
L	3	27.0 - 29.0	1,875
XL	4	29.0 - 31.0	2,040

※左右兼用

※ XS, XL サイズは取寄せとなります。

アキレスブーツ（シラックジャパン輸入品）

特徴：

- オープン式のラミネート加工された通気性素材で快適性がアップ。
- ユニークなロッカー底のデザインにより正常に近い踏み返しができ、底ヒールでは骨盤の傾きを防ぎます。
- ストラップを調節してロックすることで垂直方向に足を固定して保持します。
- 強アルミ合金のシェルにより、強度と安定性があります。
- 4枚のウレタンウェッジにより10°毎の角度調整が容易にできます。
- ナイトカバー付き（2023年8月出荷分より）

通気性に優れたフォームの使用で快適性アップ

強アルミ合金が使用されていますが、整形用に幅調整が可能です。

左右兼用 靴サイズ (cm)	
S	： ～ 23.0
M	： 23.0 ～ 27.0
L	： 27.0 ～ 30.5

AIR SELECT

エアセレクト エリート



- 内蔵されたエアセルにより患部を圧迫し、足関節/足部をサポートします。
- 多孔シェルにより通気性が高く軽量です。
- 足底部のソフトストライク技術により接地時の衝撃を軽減します。
- 適度に湾曲したロッカーソールにより、自然な歩行を可能にし、装着による負担を権限します。
- 別売りヒールサポートを挿入することで足関節の角度調節が可能です。※エリートのみ

エアセレクト ショート



サイズ (左右兼用)	S	M	L
適用範囲 (靴サイズ cm)	21.5 ~ 24.5	24.5 ~ 27.5	27.5 ~ 30.5
エリート 本体の丈の長さ (cm)	32.2	34.7	37.0
ショート 本体の丈の長さ (cm)	19.4	21.0	22.4

※装着時は必ず付属の靴下を着用し、靴下の上から装着してください。

MAXTRAX ROM Air

取寄せ



マックストラックス ロム エア

- 金属ステーは、脚形状に合わせて曲げたり、ステー上部を折ることで下肢の長さに合わせたりと、幅広く対応可能です。
- 内側、外側の両方に内蔵されたエアセルにより足関節をさばーとします。また、エアセル内の空気圧を調節することで適度なフィット感が得られます。
- 症状や治療段階に合わせてROM ヒンジによる角度調節が可能です。45°までの底屈抑制と、30°までの背屈抑制を7.5°刻みで調節できます。
- 前面オープンタイプのライナーを使用。着脱しやすく、オベ後の浮腫や、包帯などによるかさばりにも対応できます。
- 適度に湾曲した舟底型ソールが、自然な歩行を可能にします。薄いソールですが十分なクッション性があり、足底への衝撃を和らげます。接地面をグリップ力のあるゴム製にし、中の広いインソールで安定感を向上させ、歩行時の快適性を考慮しています。
- ヒールサポート (別売り) を組み合わせて挿入することで、足関節の角度調節が可能です。



ヒールサポート (別売)

XP 用ヒールサポート (エリート対応)	S
	M
	L
ヒールサポート (ロムエアー対応)	1 サイズ

※左右別

サイズ (左右兼用)	S	M	L
適用範囲 (靴サイズ cm)	21.5 ~ 23.5	23.5 ~ 27.5	27.5 ~ 31.5
本体の丈の長さ (cm)	37.5	41.5	42.5

※装着時は必ず付属の靴下を着用し、靴下の上から装着してください。

踵骨免荷ブレイス

取寄せ

踵骨骨折・術後の早期荷重歩行により
骨萎縮の予防に有効です

特長

- ◎ グラフインタイプの短下肢歩行ギブスを応用し、踵骨の後方2/3にあたる部分を免荷する足底のデザインです。
- ◎ 厚く、足底形状に合った縦・横アーチをもつインソールにより、患部をサポートします。
- ◎ 容態に合わせてスポンジを挿入し、徐々に荷重していく事ができます。
- ◎ 丈夫なアルミ合金製両側支柱により、足関節はしっかり固定されます。
- ◎ フットガードはユニークなロッカー底のデザインで、自然な歩行ローリングを可能にします。

適応症例

- ◎ 踵骨骨折後の免荷
- ◎ 足関節、足部の骨折、靭帯損傷後（インソールの交換）

旧サイズ	新サイズ	適用(足長 cm)	重量 (g)
S	1	22.0 - 23.5	750
M	2	24.0 - 26.5	850
L	3	27.0 - 29.0	1,010



容態にあわせてスポンジを挿入して荷重



プラスチック製装具って...「ちょっと」と言う方に。

柔軟素材で歩きやすい。
 見た目がスッキリ。
 靴が履きやすい。
 装着感がいい。
 嫌な音がしない。
 軽いから嬉しい。



！
 退院後、プラスチック製装具など装着が必要な患者様でも装具使用を取り止めてしまう方が多いという報告もあります。

底屈防止サポーター

実用新案
 登録済
 第3206856号

ここがポイント

部位によって伸縮素材を使い分け

伸縮性に優れた生地を使用。部位によって素材を使い分けることで足部の動きに追随。前足部には薄い素材を採用し、靴の脱ぎ履きもカンタン。

二重構造ベルトで内反足部を支持

ベルトは、二重構造で下垂足や片麻痺による内反傾向の足をしっかりと引き上げ。また、ベルトの着脱は面ファスナーだから調節もラクラク。



再成形可能なプラスチック製支柱

内蔵されたプラスチック製の支柱がフットアップ効果を向上。さらに、患者様の足の形状にぴったりフィットするから安定性もバツグン。



サイズ	S	M	L	LL
ヒールガース(cm)	28~30	30~32	32~34	34~36
MP関節周径(cm)	21~23	22~24	23~25	24~26
踵~第1MP関節(cm)	15~17	16~18	17~19	18~20

※左記各数値を参考にサイズ選定して下さい。
 ※左右別売



足関節サポーター 1		日本シグマックス	
左右兼用	S	M	ベージュ・黒
	19.0 - 25.0	25.0 - 31.0	靴サイズ (CM)
内外反 / 前方動揺性のある足関節のサポート。日常生活、軽スポーツまでサポート			PO
フィギュアエイトに基づいたモデル。薄くて伸縮性に優れた素材で装着時の違和感を軽減。			



足関節サポーター 3		日本シグマックス			
左右別	S	M	L LL	ベージュ・黒	
	19.0 - 22.0	22.0 - 25.0	25.0 - 28.0	28.0 - 31.0	靴サイズ (CM)
内反動揺性のある足関節のサポート、安静保持。リハビリ時から日常生活、軽スポーツまでサポート。			PO		
くるぶし等にフィットする設計の内側オリジナルステーと伸縮ストラップで快適にサポート。					



足関節サポーター 6		日本シグマックス			
左右別	S	M	L LL	ベージュ・黒	
	19.0 - 22.0	22.0 - 25.0	25.0 - 28.0	28.0 - 31.0	靴サイズ (CM)
内外反 / 前方動揺性のある足関節のサポート、安静保持。リハビリ時から日常生活、軽スポーツまでサポート。			PO		
オリジナルガードとフィギュア8ストラップでしっかりサポート。					



足関節サポーター FO		日本シグマックス			
左右別	S	M	L LL	ベージュ・黒	
	19.0 - 22.0	22.0 - 25.0	25.0 - 28.0	28.0 - 31.0	靴サイズ (CM)
内外反 / 前方動揺性のある足関節のサポート、安静保持。安静時からリハビリ、日常生活、軽スポーツまでサポート。			PO		
フロントオープン形状 & 3D 設計の側方 FRTP ガードにあらゆる足の形状にフィットし、足関節の様々な動揺による負担を軽減。					



ファシリエイドサポーター アキレス腱		日本シグマックス	
左右兼用	M	L	黒
	21.0 ~ 25.0	25.0 ~ 29.0	靴サイズ (CM)
アキレス腱の保護・踵の安定性・足関節の背屈抑制			併売
パッドとヒールロック機能の採用によりアキレス腱へのストレスを軽減			



エアースターラップ		白
種類	適用範囲	丈の長さ
スモール (O2C)	フリーサイズ (左右有)	22.0cm
トレーニング (O2B)		23.0cm
スタンダード (O2A)		27.0cm
エアセルの圧力は予め適切に調節されていますが、使用状況に応じて調節可能なタイプ。日本人体型にはトレーニングサイズを推奨。		



エアースターラップ ユニバース			
種類	色	適用範囲	丈の長さ
ユニバース	ブラック	フリーサイズ (左右兼用)	23.0cm
左右兼用のブラックボディタイプ。			



エアースポーツ		黒
サイズ	適用範囲 (靴サイズ) ※左右有	
XS	23.0cm 以下	
S	23.5cm ~ 24.5cm	
M	25.0cm ~ 27.0cm	
L	27.5cm 以上	
2つのストラップでスポーツ時でもずれにくい仕様。		



アンクルアジャスト LT					アルケア
左右別	S	M	L	LL	黒
	22.5 ~24.5	24.5 ~26.5	26.5 ~28.5	28.5 ~30.5	靴サイズ (CM)
	20.0 ~22.5	22.5 ~25.0	25.0 ~27.5	27.5 ~29.5	甲周囲 (CM)
靭帯損傷・各種足関節疾患					PO
2本のクロスベルトで足関節を簡単サポート。					



アンクルアジャスト ST					アルケア
左右別	S	M	L	LL	黒
	22.5 ~24.5	24.5 ~26.5	26.5 ~28.5	28.5 ~30.5	靴サイズ (CM)
	20.0 ~22.5	22.5 ~25.0	25.0 ~27.5	27.5 ~29.5	甲周囲 (CM)
靭帯損傷・各種足関節疾患					PO
内蔵網目状プラスチックステー、クロスベルトで足関節をしっかりサポート。					



アンクルアジャスト SP					アルケア
左右別	S	M	L	LL	黒
	22.5 ~24.5	24.5 ~26.5	26.5 ~28.5	28.5 ~30.5	靴サイズ (CM)
	20.0 ~22.5	22.5 ~25.0	25.0 ~27.5	27.5 ~29.5	甲周囲 (CM)
靭帯損傷・各種足関節疾患					PO
側方プラスチックステー、クロスベルトで足関節を強固にサポート。					



アンクルライト					アルケア
左右別	S	M	L	LL	グレー
	22.5 ~24.5	24.5 ~26.5	26.5 ~28.5	28.5 ~30.5	靴サイズ (CM)
	20.0 ~22.5	22.5 ~25.0	25.0 ~27.5	27.5 ~29.5	甲周囲 (CM)
靭帯損傷・各種足関節疾患					併売
2本のクロスベルトで足関節を簡単サポート。					



アンクルソフト					アルケア
左右別	S	M	L	LL	グレー
	22.5 ~24.5	24.5 ~26.5	26.5 ~28.5	28.5 ~30.5	靴サイズ (CM)
	20.0 ~22.5	22.5 ~25.0	25.0 ~27.5	27.5 ~29.5	甲周囲 (CM)
靭帯損傷・各種足関節疾患					併売
内蔵網目状プラスチックステー、クロスベルトで足関節をしっかりサポート。					




アンクルサポート					アルケア
左右別	S	M	L	LL	グレー
	22.5 ~24.5	24.5 ~26.5	26.5 ~28.5	28.5 ~30.5	靴サイズ (CM)
	20.0 ~22.5	22.5 ~25.0	25.0 ~27.5	27.5 ~29.5	甲周囲 (CM)
靭帯損傷・各種足関節疾患					併売
側方プラスチックステー、クロスベルトで足関節をしっかりサポート。					




アンクルフィット					アルケア
左右別	S	M	L	LL	ブルー
	22.5 ~24.5	24.5 ~26.5	26.5 ~28.5	28.5 ~30.5	靴サイズ (CM)
靭帯損傷・各種足関節疾患					併売
1.7mm厚のネオブレーンで薄さとフィット性を重視。					

展開図 (右足)


アンクルアジャスト LT
アンクルライト

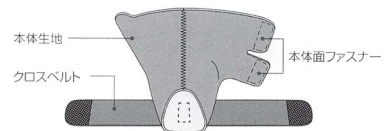

アンクルアジャスト ST
アンクルソフト

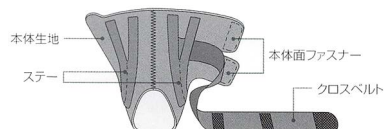

アンクルアジャスト SP
アンクルサポート

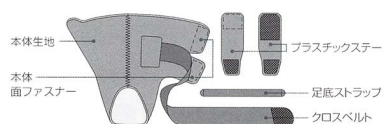

足関節サポーター / NinToku



アンクルファイター107N					中村プレス	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	グレー/黒
靴サイズ cm	18 ~20	21 ~23	24 ~25	26 ~27	28 ~29	
足関節の内外反の固定					PO	
シリコンパッド付で装着簡単、スピーディー						



アンクルエイト 108N			中村プレス
サイズ 左右別	M	L	ブルー
靴サイズ cm	21~24	24~27	318-08
足関節は内反捻挫の予防に			PO
内反はしっかり押さえ底背屈はフリー			



パッシングバンド 105N				中村プレス
サイズ 左右兼用	S	M	L	シルバーグレー ベージュ
靴サイズ cm	20~23	24~26	27~28	18-01
足関節捻挫の予防・受傷後のケアに				PO
症状に応じて自由に使えるサポーターです。				



POアンクル 109N				中村プレス
サイズ 左右別	S	M	L	グレー
靴サイズ cm	21~23	24~25	26~27	16-09
内外反の固定、距骨の前方向動揺の防止				PO
シリコンアーチ内蔵・抜群の固定力				



スウェード・O・アンクルブレス							Core Products
XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	白・黒※
	23-24	25-26	27-28	29-30	31-31	31-	足サイズ (cm)
足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期 機能的治療							左右兼用
編み上げ (ヒモ式) ひもの張り調節と内蔵ステーにより支持性の調整 可能							
※ XXS, XXL は白のみになります							



スウェード・O・イージーロック				Core Products
S	M	L	XL	黒のみ
25-26 cm	27-28 cm	29-30 cm	31- cm	足サイズ (cm)
足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期 機能的治療				左右兼用
調節が簡単なマジック式 マジックの張りとの内蔵ステーにより足関節の内外 反運動を制限				



底屈防止サポーター				オルソ・ラボ
S	M	L	LL	黒
28-30	30-32	32-34	34-36	ヒールガース (cm)
21-23	22-24	23-25	24-26	MP 関節周径 (cm)
15-17	16-18	17-19	18-20	踵~第1 MP 関節 (cm)
軽度片麻痺・下垂足				左右別
部位によって伸縮素材を使い分け 二重構造ベルトで内反足部を支持 再成型可能なプラスチック性支柱				



テープサポーター					タケウチG	
サイズ 左右兼用	XS	S	M	L	XL	黒のみ
靴サイズ cm	22	23.5 ~24	24 ~25	25.5 ~27	27~	
足関節捻挫の予防・固定					PO	
巻きやすさ・コスト面等あらゆる点でテーピング の弱点をカバー						



アンクルフィックス						シラックジャパン
XXS	XS	S	M	L	XL	黒
23.0 -25.5	25.5 -28.0	28.0 -30.5	30.5 -33.0	33.0 -35.5	35.5 -38.0	A 図周径 (cm)
20.0 -22.0	22.0 -23.5	23.5 -25.5	25.5 -27.5	27.5 -29.5	29.5 -31.0	参考靴サイズ (cm)
足関節内外反捻挫 (軽・中度) 術後の固定						左右兼用
足関節の保護						
ワンタッチレースアップ (編み上げ式) 非伸縮性フィギュアエイトストラップ カフストラップ						

足関節サポーター／NinToku

エラスティック アンクル サポート # 504 オットーボック



適用： 足関節の保護

特徴： ソフトで伸縮性のあるバンド構造の本体により、簡易に足関節のフィギュアエイト機能が得られます。両端がループになっており、ループに足を通して巻付け、留めることができます。

品番：504	
左右兼用 足部8字周径 (cm)	
S	51 ~ 53
M	53 ~ 55
L	55 ~ 57
LL*	57 ~ 59
3L*	59 ~ 61
色	ベージュ

※ LL、3L サイズはドイツからの取寄せとなります。



プロフッター 101N					中村プレス	
サイズ 左右別	S	M	L	XL	ベージュ	
靴サイズ cm	22	24	26	27	17-09	
軽度な片麻痺・腓骨神経麻痺等					PO	
内反・尖足を防ぎ室内外とも使用できます						



保温シームレスサポーター		アルケア	
左右兼用	フリーサイズ	白	
		18-02	
足関節の保温等に		併売	
保温性・弾力性・吸湿性に優れています			



マックスパットウール足首			日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	フリーサイズ		白	
			18-09	
足関節炎、神経痛、冷え性等			併売	
ウールの特性である保温性と通気性に優れています				



アンクルクロス		アルケア	
サイズ 左右兼用	フリーサイズ		ベージュ/黒
足長 幅×長さ	21cm~30cm 8cm×55cm		
足関節動揺等		併売	
足関節の軽度サポートに			



ファシリエドサポーター足首		シグマ	
左右兼用	フリーサイズ		ベージュ/黒
靴サイズ	20.0~27.5cm (成人用) / 17.0~22.0cm (子供用)		
足関節の圧迫、保護		併売	
巻き始めがループ形状のフィギュア8サポーター			

取寄せ



アキレスヒールパッド

- ・ミネラルオイルゲルがヒールの後方への圧迫や摩擦を軽減します。
- ・スキーブーツ、スケート靴、スパイクシューズ等のスポーツシューズに最適です。
- ・パンプス等の高いヒールの靴による、衝撃や痛みを軽減します。

品番	サイズ		個数
10385	S/M	女性向き	1個
10395	L/XL	男性向き	1個

取寄せ



マレオラーズリーブ

- ・内踝と外踝を二つのゲルパッドで保護します。
- ・足関節にかかる衝撃や圧迫を軽減します。
- ・スキーブーツ、スケート靴、スパイクシューズ等のスポーツシューズに最適です。

品番	サイズ	個数
15005	1サイズ	1個

取寄せ



ソフトスキンヒールズリーブ

- ・踵部にフィットする解剖学的な形です。
 - ・踵部の乾燥を防ぎ、潤いを与えます。
 - ・皮膚炎、アトピー性皮膚炎にも使用できます。
 - ・保湿クリーム（ステップインセンス等）との兼用に最適です。
- ※装着しての歩行は推奨されていません。就寝時に向きます。

品番	サイズ	個数
15265	1サイズ	1個

取寄せ



ヒール・エルボー スリッパオーバー

- ・足部や踵まわりのあらゆる部位に対応します。
- ・潰瘍のある踵や肘に最適です。
- ・乾燥した肌の割れの助けとなります。

サイズ		個数
S/M	女性向き	1個
L/XL	男性向き	1個

取寄せ



ブーツバンパー

- ・かさばらずに足部や足関節を摺れから保護します。
- ・スキーブーツ、スケート靴、スパイクシューズ等のスポーツシューズに最適です。
- ・足部や足関節に心地より圧迫が得られます。

サイズ		個数
S/M	女性向き	1個
L/XL	男性向き	1個

取寄せ



スケートバイトプロテクター

- ・靴ひもによる摩擦や圧迫を防ぎます。
- ・スキーブーツ、スケート靴、スパイクシューズ等のスポーツシューズに最適です。
- ・足部や足関節に心地より圧迫が得られます。

サイズ	個数
1サイズ	1個

※シリポス製品の在庫についてはお問い合わせください

カーボン アンクル セブン **ottobock.**

完成用部品 取寄せ

【完成品見本】




特徴

- ・下腿部から足底部まで続く一体型の構造
- ・軽量でシンプルなデザイン
- ・カーボンの弾性により、なめらかな歩行を補助
- ・足底部 7° 外旋による良好な踏み返し
- ・プラスチック成型との優れた適合性による快適フィット
- ・活動的な子供たちの生活をサポート

自然な歩行を補助

足部のトゥアウト角を考慮し、進行方向線に対して角度を 7° 外旋させて設計されています。足の長軸に設定することで、歩行中の足部が生理的なアライメントに近づき、良好な踏み返しへとサポートします。

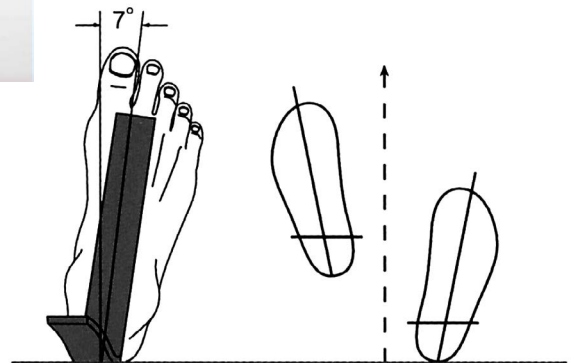

【製品の選択】 足部のトゥアウト角を考慮し、進行方向線に対して角度を 7° 外旋させて設計されています。足の長軸に設定することで、歩行中の足部が生理的なアライメントに近づき、良好な踏み返しへとサポートします。

活動レベル 通常

日常生活における活動や簡単な活動を独立して行える方

活動レベル 高

日常生活に支障なく、スポーツやかけっこなども行う活動的な方

体重	発注品番 活動レベル:通常	発注品番 活動レベル:高	支柱幅	支柱の高さ
~100 kg	17CF1=L/R 1	17CF1=L/R 1	30 mm	350 mm
~90 kg	17CF1=L/R 2	17CF1=L/R 1	30 mm	350 mm
~80 kg	17CF1=L/R 3	17CF1=L/R 2	30 mm	350 mm
~70 kg	17CF1=L/R 4	17CF1=L/R 3	30 mm	350 mm
~60 kg	17CF1=L/R 5	17CF1=L/R 4	30 mm	350 mm
~50 kg	17CF1=L/R 6	17CF1=L/R 5	25 /30 mm	330/350 mm
~40 kg	17CF1=L/R 8	17CF1=L/R 7	25 mm	330 mm
~30 kg	17CF1=L/R 9	17CF1=L/R 8	25 mm	330 mm
~20 kg	17CF1=L/R 11	17CF1=L/R 10	22 mm	260 mm
~10 kg	17CF1=L/R 12	17CF1=L/R 11	22 mm	260 mm

※サイズによっては、ドイツからのお取寄せになります。

※ご注文の際には、左(L)、右(R)をご指定ください。

※装具を装着した歩容ビデオをご用意しています。弊社までお問合せください。

タマラック

完成用部品

特殊なウレタン製ジョイントで、ウレタンの弾性、エネルギー蓄積性を利用して足関節運動を制御します。ジョイント中心部に補強材が使用されています。オプションでジョイントキャップがあります。 ※ダミー別売り



■タマラック

品番/サイズ	色	巾 (mm)	全長 (mm)
740-P	白、黒 (-BLK)	11	32
740-M	白、黒 (-BLK)	13	38
740-L	白、黒 (-BLK)	15	45

※品番例：白 740-M 黒 740-M-BLK

■タマラック 背屈補助

品番/サイズ	硬度	色	巾 (mm)	全長 (mm)
742-P-※	75,85,95	白、黒 (-BLK)	11	32
742-M-※	75,85,95	白、黒 (-BLK)	13	38
742-L-※	75,85,95	白、黒 (-BLK)	15	45

※品番例：白 (硬度 85) 742-M-85 黒 (硬度 85) 742-M-85-BLK

タマラックバリアブルアシスト

完成用部品

ねじの調節により、背屈角度の調節が可能です。(～約60°)



■タマラックバリアブルアシスト

品番/サイズ	色	巾 (mm)	全長 (mm)	厚さ (mm)
743-P	白	18	43	9
743-M	白	25	60	11

タマラッククレビスフィア

完成用部品

内外踝の間接軸を自動的に合わせる球状の関節が内蔵されており、24°の範囲で円錐状に回旋します。足関節の底屈調整が可能です。



■タマラックバリアブルアシスト

品番/サイズ	色	巾 (mm)	全長 (mm)	厚さ (mm)
743-P	白	18	43	9
743-M	白	25	60	11

ジレット

完成用部品

特殊なウレタン製ジョイントで、ウレタンの弾性、エネルギー蓄積性を利用して、足関節運動を制御します。



■ジレット

品番/サイズ	種類	色	巾 (mm)	全長 (mm)
775-I	ストレート	クリアー	10	29
775-C	ストレート	クリアー	11	49
775-A	ストレート	クリアー	14	45
776-CS	背屈補助 (約 0.5kg)	シルバー	11	44
776-CC	背屈補助 (約 1.0kg)	クリアー	11	44
776-CG	背屈補助 (約 1.5kg)	ゴールド	11	44
776-AS	背屈補助 (約 0.5kg)	シルバー	14	52
776-AC	背屈補助 (約 1.0kg)	クリアー	14	52
776-AG	背屈補助 (約 1.5kg)	ゴールド	14	52

たわみ足継手 エクシブル (17AF10) **ottobock.**

足関節を底背屈方向に動きを限定する、フレキシブルな素材で出来ている足継手です。

■ヘックスローブネジを起用


トルクの伝達効率が良く、しっかり回すことができる。ネジから工具がはずれにくい。摩耗や割れが起こりにくく耐久性がいい

※**ネジ側**にはヘックスローブレンチ (トルクスレンチ) **T20** が必要です。

■ブッシュを本体に固定

落下による紛失を防止し、ネジ留めしやすい。ナット側にもレンチをかませることが可能。(ロックタイトでネジ留め後に外したいときなどに便利。)

※**ナット側**にはヘックスローブレンチ (トルクスレンチ) **T25** が必要です。

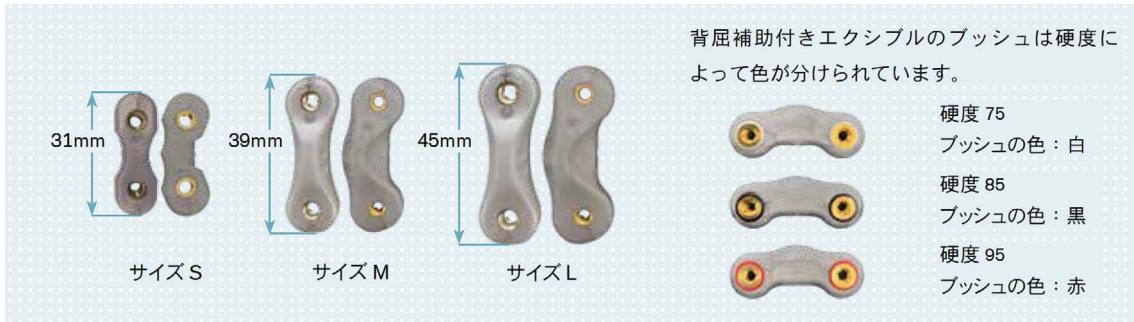

品番	サイズ	硬度
エクシブル (ストレート) 17AF10 = サイズ	S / M / L	
エクシブル (背屈補助) 17AF10 = サイズ - DA - 硬度	S / M / L	LT (低:75 白) MD (中:85 黒) ST (高:95 赤)



セット内容

※レンチ (L 型) は弊社で販売しておりますのでお問い合わせください。

※ダミーは繰り返し使うと縮むことがありますので、付属のダミーをお使いください。

※ダミーはカット時の材料ロスを考えて、仕様上本体よりやや長めに作られています。

プラスチック継手

オクラホマ

完成用部品

軽量で耐久性に優れたプラスチック製ジョイントです。



■オクラホマ

品番/サイズ	巾 (mm)	全長 (mm)
760-P	24	51
760-S	25	67
760-M	32	83
760-L	38	95

PDC 底背屈用・背屈補助用

完成用部品

ロッドの調節により、可動域の調整ができます。底背屈用と背屈補助用があります。



■ PDC ジョイント

品番	サイズ
020840 (底背屈用)	フリー
020836 (背屈補助用)	フリー

PDA

完成用部品

足関節の底背屈のコントロールが可能です。ロッドかスプリングの選択が可能です。



■ PDA ジョイント

品番	サイズ
020894	フリー

スコッティ

完成用部品

コンパクト設計のステンレス製ジョイントで、ウレタンバンパーが付属しています。



■ スコッティ

品番/サイズ	巾 (mm)	全長 (mm)
780-S	13	64
780-L	13	76

キャンバー

完成用部品

7種類のカムから選択して、最適な可動域を設定できます。



■ キャンバー

品番/サイズ	巾 (mm)	全長 (mm)
750-S	29	79
750-M	38	108
750-L	40	114

ギャフニー

完成用部品

コンパクト設計のステンレス製ジョイントです。オプションの専用フレクサーストラップで、背屈補助が可能になります。



■ ギャフニーヒンジキット

品番	巾 (mm)	全長 (mm)	目安体重	特徴
710	14	75	60-80kg	標準体型
707	14	61	55-80kg	コンパクト
660	11	61	20-60kg	小児用
747	14	75	35kg 以下	角度調節

■ フレクサーストラップ

品番	巾 (mm)	全長 (mm)	特徴
2000	13	49	子供用
2001	15	62	大人用



(OB) スナップストップ

特徴

- ・プラスチック製 AFO に簡単設定
- ・ユーザーに合わせた、底屈・背屈角度の調整が可能
- ・溝に差し込むだけの簡単交換
- ・小児用と大人用に 2 種類
- ・バンパーの厚みは選べる 4 段階 (3.5mm, 5.5mm, 7.0mm, 9.0mm)
- ※標準 (neutral) は 5.5mm になります
- ※ダミー巾は標準 5.5mm 用になります
- ・高密度のポリウレタン使用による、優れた耐久性
- ・バンパー接触時の音や衝撃を吸収

発注品番	製品名	セット内容
17S1=A-P1	スナップストップ大人用 3.5 mm	本体 1 個、 ダミー 1 個、 固定用のクギ 1 本
17S1=A-N	スナップストップ大人用 5.5 mm	
17S1=A-D1	スナップストップ大人用 7.0 mm	
17S1=A-D2	スナップストップ大人用 9.0 mm	
17S1=P-P1	スナップストップ小児用 3.5 mm	
17S1=P-N	スナップストップ小児用 5.5 mm	
17S1=P-D1	スナップストップ小児用 7.0 mm	
17S1=P-D2	スナップストップ小児用 9.0 mm	

- 大人用と小児用ともに、各本体の厚みは同じになりますが、小児用の差込み径とチップの底面の大きさは小さくなります。

モーションコントロールリミッター (MCL)

完成用部品

足関節の可動域を制限します。

■ 795

ロッドの調整により、任意の可動域が得られます。ウレタンバンパーが衝撃音を吸収します。

■ 755

ウレタン製のストッパーで、製作が容易です。上端を切削することで、任意の可動域が得られます。



■ 655

ナイロン製の本体とステンレス調節金具の溝穴を利用して任意の可動域で固定します。



品番	サイズ	長さ (mm)
795	フリー	
755	フリー	
655-MCL-S	S	46
655-MCL-L	L	67
655-MCL-XL	XL	75

NB ラテラルウェッジ

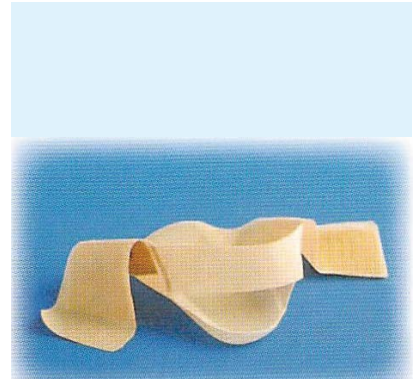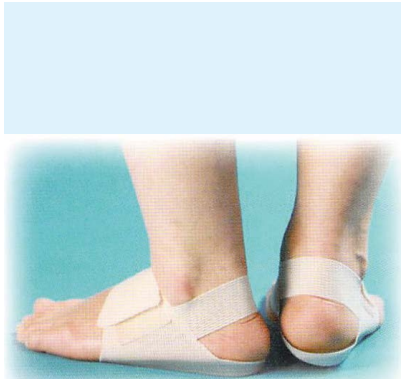

ラテラルウェッジ					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	透明
	21	23	25	27	靴サイズでの目安 (cm)
4mm (301N) ※ LL は 7,10mm のみ 7mm (302N) 10mm (303N) 有り					PO
外側くさび 変形性膝関節症 (内側)、内側半月板損傷、内反膝等					

※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。

スーパーラテラル (すじいり)					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	ページュ
	21	23	25	27	靴サイズでの目安 (cm)
4mm (331N) ※ LL は 7,10mm のみ 7mm (332N) 10mm (333N) 有り					PO
フットホルダー不要の一体型					

ニュースーパーラテラル					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	ページュ
	21	23	25	27	靴サイズでの目安 (cm)
4mm (331S) ※ LL は 7,10mm のみ 7mm (332S) 10mm (333S) 有り					PO
フットホルダー不要の一体型 ベルトをシリコンコーティング					

NB アーチ付ラテラル




アーチ付ラテラル					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	透明
	21	23	25	27	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (352N) 10mm (353N) 有り					PO
ラテラルウェッジに、ズレ防止のため内側縦アーチの追加					

※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。

スーパーアーチ付ラテラル (すじいり)					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	ページュ
	21	23	25	27	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (354N) 10mm (355N) 有り					PO
フットホルダー不要の一体型					

ニュースーパーアーチ付ラテラル					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	ページュ
	21	23	25	27	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (354S) 10mm (355S) 有り					PO
フットホルダー不要の一体型 ベルトをシリコンコーティング					

NB ラテラルプラス

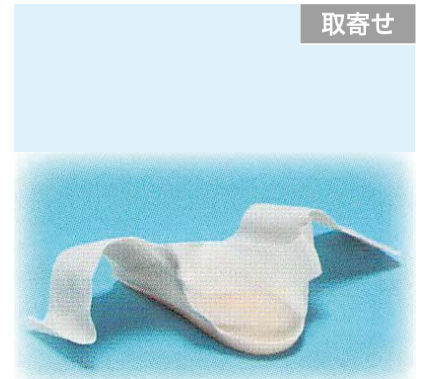

ラテラルウェッジプラス					中村ブレイス	
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (391N) 10mm (393N) 有り						PO

ラテラルウェッジをより遠位まで延長 (M サイズで長さ約 +15mm, MP 中 +10mm) し、立脚中期から後期にかけて足底外側に圧がかかるように設計。
※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。

スーパーラテラルプラス (すじいり)					中村ブレイス	
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (395N) 10mm (397N) 有り						PO

フットホルダー不要の一体型

ニュースーパーラテラルプラス					中村ブレイス	
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (395S) 10mm (397S) 有り						PO

フットホルダー不要の一体型
ベルトをシリコンコーティング

NB アーチ付ラテラルプラス



アーチ付ラテラルプラス					中村ブレイス	
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (392N) 10mm (394N) 有り						PO

ラテラルウェッジをより遠位まで延長し、立脚中期から後期にかけて足底外側に圧がかかるように設計。ズレ防止のため内側縦アーチの追加
※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。

スーパーアーチ付ラテラルプラス (すじいり)					中村ブレイス	
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (396N) 10mm (398N) 有り						PO

フットホルダー不要の一体型

ニュースーパーアーチ付ラテラルプラス					中村ブレイス	
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (396S) 10mm (398S) 有り						PO

フットホルダー不要の一体型
ベルトをシリコンコーティング

※ SS サイズは取寄せになります。



ソルボエッジ								武内義肢	
サイズ 左右別	S	M	L	サイズ	S	M	L	ページ	
足長 cm	20 5 22	23 5 25	26 5 27	高低差 m/m	7	8	10		I14-01
変形性膝関節症の装具療法用								PO	
軽量ソルボ抗菌防臭力バーの一体化により固定性抜群									



取寄せ

フットエッジ KW-1				カナオカ	
サイズ 左右別	M	L		白	
靴サイズ cm	23	25		I14-02	
差高は10m/mです				PO	
特殊ウレタン樹脂に衝撃吸収材を挿入					



取寄せ

フットエッジ KW-2					カナオカ	
サイズ 左右別	S	M	L	XL	白	
靴サイズ cm	21	23	25	27	I14-03	
差高は10m/mです					PO	
復元力・耐久性に優れしかも軽量						



取寄せ

フットエッジ KW-70				カナオカ	
サイズ 左右別	M	L		白	
靴サイズ cm	23	25		I14-04	
差高は7m/mです				PO	
パフ加工、糊付加工も可能です					



取寄せ

フットエッジ KW-3			カナオカ		
サイズ 左右別	S~M	L~LL	白		
靴サイズ cm	23~25	25.5~	I14-05		
			PO		
両壁を高くして厚みを薄くしてあるので、内側に曲がり易く足にフィットします					

NB ミディアルウェッジ



ミディアルウェッジ					中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	透明
	19-21	21-23	23-25	25-27	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (307N) 10mm (308N) 有り					PO

内側くさび
変形性膝関節症（外側）、外側半月板損傷、外販膝、
回内足、など
※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。

スーパーミディアル（すじいり）					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	ページュ
	19-21	21-23	23-25	25-27	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (305N) 10mm (306N) 有り					PO


フットホルダー不要の一体型

ニュースーパーミディアル					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	ページュ
	19-21	21-23	23-25	25-27	靴サイズでの目安 (cm)
7mm (305S) 10mm (306S) 有り					PO

フットホルダー不要の一体型
ベルトをシリコンコーティング

アーチサポート / NinToku

NB アーチサポート

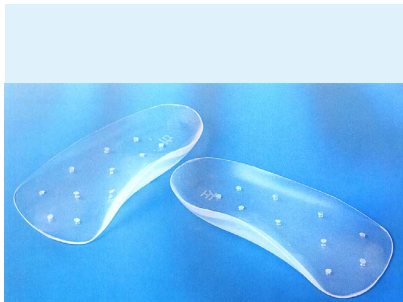

高アーチ/低アーチサポート							中村ブレイス
左右別	SSS	SS	S	M	L	LL	
靴サイズ (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	
アーチ高 (mm)	高	11	13	15	17	19	22
	低	—	10	11	12	13	—
高アーチ (401N) ※ SSS-LL 低アーチ (402N) ※ SS-L							PO

高アーチ：骨折時の足底部支持 など
低アーチ：扁平足障害、リウマチ足 など

※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。

スーパーアーチサポート（すじいり）							中村ブレイス
左右別	SSS	SS	S	M	L	LL	
靴サイズ (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	
アーチ高 (mm)	高	11	13	15	17	19	22
	低	—	10	11	12	13	—
スーパー高アーチ (403N) ※ SSS-LL スーパー低アーチ (404N) ※ SS-L							PO

フットホルダー不要の一体型

ニュースーパーアーチサポート							中村ブレイス
左右別	SSS	SS	S	M	L	LL	
靴サイズ (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	
アーチ高 (mm)	高	11	13	15	17	19	22
	低	—	10	11	12	13	—
ニュースーパー高アーチ (403S) ※ SSS-LL ニュースーパー低アーチ (404S) ※ SS-L							PO

フットホルダー不要の一体型
ベルトをシリコンコーティング

※ SSS, SS サイズは取寄せになります。




取寄せ

フットアーチ 100		カナオカ	
サイズ 左右別	フリーサイズ	白	
			116-01
足底部支持に			PO
特殊ウレタン樹脂使用、パフ加工・糊付け加工も可能			



取寄せ

フットアーチ 200		カナオカ	
サイズ 左右別	フリーサイズ	白	
			116-02
足底部支持に			PO
特殊ウレタン樹脂使用、パフ加工・糊付け加工も可能			

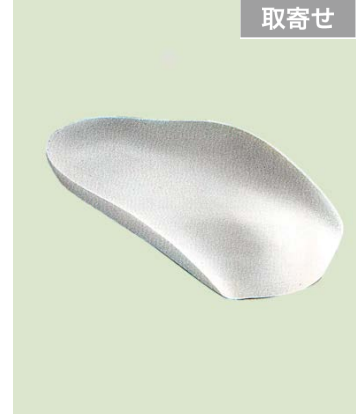

取寄せ

フットアーチ 500		カナオカ	
サイズ 左右別	S~M	L~XL	白
靴サイズ cm	~ 24.0	24.0 ~	116-03
足底部支持			PO
特殊ウレタン樹脂使用、パフ加工・糊付け加工も可能			



フットアーチ 600		カナオカ	
サイズ 左右別	S~M	L~XL	白
靴サイズ cm	~ 24.0	24.0 ~	116-04
足底部支持			PO
特殊ウレタン樹脂使用、パフ加工・糊付け加工も可能			



ソルボタテアーチサポーター		ソルボメディカル	
サイズ 1足売	S	L	白
足長 cm	22.0 ~24.0	25.0 ~27.0	116-05
扁平足・タテアーチ等			併売
土踏まず部にソルボ縦アーチパッドを装着			



ソルボヨコアーチサポーター		ソルボメディカル	
サイズ 1足売	S	L	白
足長 cm	22.0 ~24.5	25.0 ~27.0	116-06
横アーチ低下による中足骨痛・外反母趾等			併売
中足部に装着したヨコアーチパッドが横軸アーチをサポート			



補高 (ヒールアップ)						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	透明
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
5mm (371N) 10mm (372N) 有り						PO
脚長差の補正、アキレス腱周囲炎 など						

※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。

取寄せ



スーパー補高 (すじいり)						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	ベージュ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
5mm (375N) 10mm (376N) 有り						PO
フットホルダー不要の一体型						

取寄せ



ニュースーパー補高						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	ベージュ
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
5mm (375S) 10mm (376S) 有り						PO
フットホルダー不要の一体型 ベルトをシリコンコーティング						

取寄せ



補高 (フィラー)						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	透明
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	靴サイズでの目安 (cm)
15mm (373N) 20mm (374N) 有り						PO
特殊フィラー配合で軽量 削りやすく、高さの微調整が可能						

※フットホルダーのサイズは p.26 を参照してください。



NB フットホルダー



RG ソフトホルダー



ポケットソックス				カナオカ	
サイズ	S	M	L	ベージュ	
左右兼用					
足底板の大きさと発注				I14-08	
つま先までのソックスタイプで足底板をカバー				PO	
防臭・抗菌加工済みの薄手のタイプ、丸洗いOK					

NB フットホルダー サイズ対応表

ラベルの色	水色	赤色	黄色	ピンク	オレンジ
ラテラル用	S	M	L	LL	—
アーチ付ラテラル用	S	M	L	LL	—
アーチ用	SS	S	M	L	LL
ミディアル用	SS	S	M	L	LL
ラテラルプラス用	SS	S	M	L	LL
アーチ付ラテラルプラス用	SS	S	M	L	LL

※補高用 (5,10mm, フィラー 15mm,20mm) は補高用ホルダー (マチ無) に対応

※別注でマチ付きホルダーに対応可能 (受注生産)

※各種マジック縫い付け有り・無しがございますのでご指定ください

NB/RG ホルダー 寸法表

NB ラテラル用ホルダー	S	M	L	LL	アーチ用 LL
タテ寸法 cm	13	14.5	16	17	18
ヨコ寸法 cm	7	7.5	7.5	8.5	9

※おおよその寸法です

RG ソフトホルダー	S	M	L	LL	WS-M	WS-L
タテ寸法 cm	12	12	13	14.5	14	15
ヨコ寸法 cm	6	6	6	7	7	8

※おおよその寸法です

※ WS= ワイドソール

インソール用 ソックス ‘ボックス’



裏返して色違いのホルダーに
インソールをセット、表に戻して履くだけ。
使いやすさはそのまま、さらに改良された
ホルダーで新しくなりました。

新色カラー
紺・ピンク



サイズ	S	M	L
c m	21.0 ~ 22.5	23.0 ~ 25.0	25.5 ~ 27.5
紺	○	○	○
ピンク	○	○	△


ヒールカップ



新ビスコヒール						パワーファインド	
サイズ 1足入り	O	I	II	III	IV	ブルー	
靴サイズ cm	18.0 ~20.0	20.0 ~22.5	22.5 ~25.5	25.5 ~27.5	27.5 ~		
アキレス腱過敏感症・筋腱疾患等							併売
2種類のシリコン材を使用し、つなぎ目をpowerWave!に変更							



ビスコスポット			パワーファインド		
サイズ 1足入り	I	II	白/グレー		
靴サイズ cm	20.0~26.0	26.0~26.5			
踵距症候群及び踵骨下筋膜炎症等					併売
衝撃吸収の異なる2つの部分が組み合わされています					

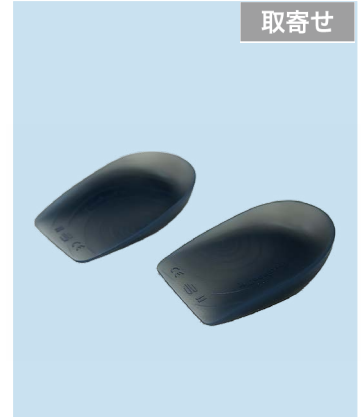

取寄せ

ビスコヒールK型				パワーファインド	
サイズ 1足入り	I	II	IV	ベージュ	
目安す	小児	女性	男性	118-05	
踵の外支・内支による変形					併売
一方を高くしたエッチタイプの踵クッションです					




取寄せ

ビスコペッド						パワーファインド	
サイズ 1足入り	I	II	III	IV	V	透明/ブルー	
靴サイズ cm	23 ~24	24.5 ~25.5	26 ~27	27.5 ~28.5	29 ~30.5	117-04	
足底の痛み、角化症、拇指球の変形等							併売
中央・踵により柔らかい特性パッドを使用圧力を緩和							



取寄せ

ヒールスパー ウィズ リムーバルプラグ			シリボス	
	S	M	L	
男性	-	23 ~ 25	26 ~ 28	靴サイズでの目安 (cm)
女性	21.5 ~22.5	23.5 ~26.5	27.5 ~29.5	
踵部のパッドを取り外せるシリコン製のショックアブソーバー。あらゆる靴にフィットし靴の中でズレにくい。				

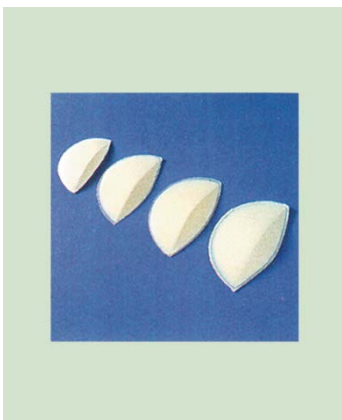

ソルボ縦軸アーチ・パッド					ソルボメディカル	
サイズ	SS	S	M	L	乳白	
高さ mm	6.5	8	10	12	119-07	
内外側縦軸アーチの支持パッド						併売
左右兼用、各サイズ10ヶ入 1パック						

ソルボ横軸アーチパッド (メタタル)				ソルボメディカル	
サイズ	S	M	L	乳白	
高さ mm	5	6	7	119-08	
縦軸アーチの支持パッド					併売
左右兼用、各サイズ10ヶ入 1パック					

ソルボDRウエッジ・パッド							ソルボメディカル		
サイズ	S	M	L	サイズ	S	M	L	乳白	
差高 mm	5	5	5	差高 mm	8	8	8		
踵骨後足の内側・外側エッジとして使用								併売	
左右兼用、各サイズ10ヶ入り 1パック									

ヒールサポーター / NinToku

ヒールクッションサポーター



ソルボヒールサポーター			ソルボメディカル	
サイズ 1足	S	L	白	
足長 cm	22.5 ~24.5	25.0 ~27.0	118-08	
足関節のサポートを強化			併売	
踵部にソルボパットを装着				



かかとくん (ウールタイプ)			ソルボメディカル	
サイズ 1足	S	L	白	
足長 cm	22.5 ~24.5	25.0 ~27.5	118-09	
足関節のサポートを強化			併売	
踵部にソルボパットを装着、薄手				

SILIPOS®



アースリティック・ダイアベティック ゲルソックス

- ・足底に 2mm 厚のゲルが生地との間に挟まれています。
- ・履き口の締め付けはありません。
- ・足の潰瘍化を防ぎます。
- ・神経障害のある足部に最適です。
- ・胼胝形成を防ぎます。
- ・軟部組織の補助的な役割をはたします。

ソックスサイズ cm	靴サイズ cm	個数	カラー
25 ~ 27	23.5 以下	1 ペア	白 黒
27 ~ 29	23.5 ~ 27	1 ペア	
28 ~ 31	27 以上	1 ペア	



ソフトソックス

- ・足底に 6mm 厚のゲルが生地との間に挟まれています。
- ・リウマチや神経障害のある足部に適しています。
- ・足底への衝撃を非常に効果的に吸収します。
- ・軟部組織の補助的な役割をはたします。
- ・中底が深い靴が必要です。

サイズ	cm	個数
S	25 ~ 27	1 ペア
M	27 ~ 29	1 ペア
L	28 ~ 31	1 ペア
XL	31 ~ 34	1 ペア

※シリポス製品の在庫についてはお問い合わせください

アーチ付パワフルとんちゃん 204N

外反母趾装具に新提案


By 中村ブレイス



扁平足を伴う
外反母趾変形に



- シリコンゴム製アーチクッキーを挿入
前足部の回内変形を抑制
- 二種類のアーチクッキーで
高さ調節が可能
- 支持性を維持するために
S字型のプラスチックステーを内蔵
- シリコンゴム製メタタルザルパッド付き

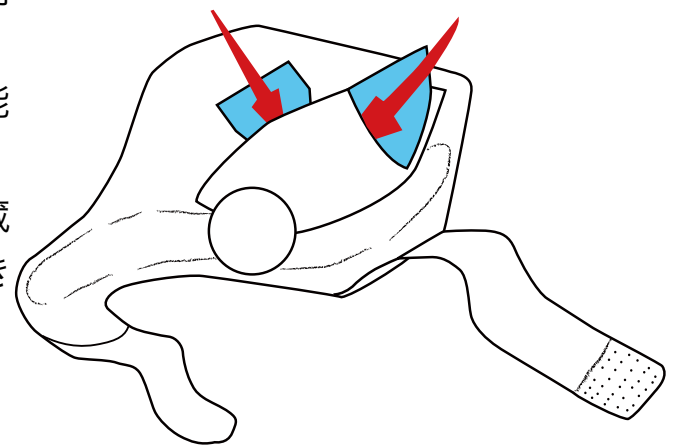

サイズ	S	M	L	色：ベージュ 左右別
MP 関節周径での 目安 (cm)	20~21	22~23	24~25	

外反母指装具


スーパートービック 中村ブレース (株)



中村ブレース
外反母趾装具の使い分け

強固な変形に簡単に対応できるスーパータイプです。予防用、治療用として幅広くお使いいただけます。


- 歩行時の足の踏み返しを防げないシンプル構造。
- 昼夜間いづれも破損の心配なく使用できます。

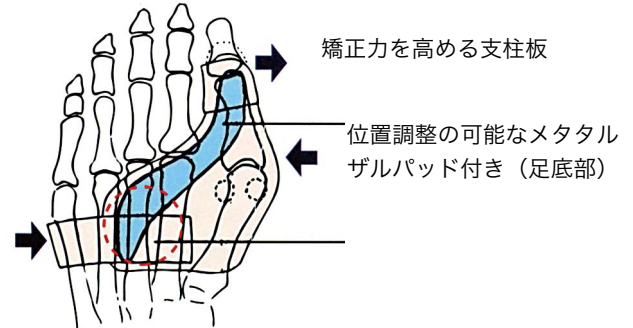

「スーパートービック」は、拇趾の変形をプラスチックステールにより補正するとともに付属のメタルザルパッドで足の横アーチ構造を保持することができます。

サイズ	S	M	L	LL	左右別
MP 関節周径で の目安 (cm)	20~21	22~23	24~25	26~27	

	症状	昼用	夜用	靴との併用	
スーパートービック	軽度~中度	○	◎	△爪先の幅の広い靴を併用	医療用
トービック	軽度	○	△	○	予防用
パワフルとんちゃん	軽度	◎	○	△爪先の幅の広い靴を併用	予防用
とんちゃん	軽度	△	○	△爪先の幅の広い靴を併用	予防用

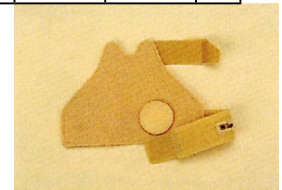


外反母趾の予防に信頼と実績

トービック



スマートなベルト状の予防・矯正バンド

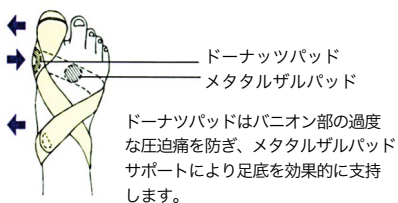


ソフトで強い矯正力

パワフルとんちゃん



趾間ベルトにより拇趾のみを矯正できます

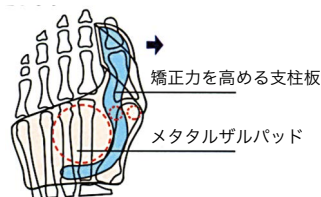

夜間用、取り扱いのやさしい

とんちゃん



手軽な予防用バンドです。付属のパッドまたはコットンを丸めてベルトで固定してお使いください

- カンタン、目立たない、洗えます。
- 足裏にはツボおさえ(メタルザルパッドサポート)がつけてあります。
- ストッパー付もあります。



サイズ	S	M	L	左右別
靴サイズでの めやす (cm)	22	24	26	

サイズ	SS	S	M	L	LL	左右別
MP 関節周径で の目安 (cm)	21	22	23	24	25	

サイズ	SS	S	M	L	左右別
MP 関節周径で の目安 (cm)	22	23	24	25	

ベルケマン足用プレッシャーリリーフ製品



トゥースプレッター #8129		ベルケマン	
サイズ	M L	肌	
1パック2個入り			
外反拇指予防と第5趾の内反等		PO	
ソフトラバー製、クッション調節ラバー付			

トゥーカム #8230		ベルケマン	
サイズ	フリーサイズ	肌	
1パック2個入り		I22-05	
足指の圧迫痛の軽減に		PO	
ソフトなフォームラバーで全足指間をカバー			

トゥセパレーター #8130		ベルケマン	
サイズ	S M-L XL	肌	
入個数	4個入 3個入 2個入	I22-06	
軽度の外反母趾や予防に		PO	
薄手のフォームラバー製でかさばりません			



取寄せ



バニオンヘッダー #8147		ベルケマン	
サイズ	フリーサイズ	肌	
1個入り		I22-07	
外反母趾によるバニオンの保護等		PO	
バニオン（親指の付け根）クッションとトゥーセパレーターの組み合わせ			

トゥークッション#8154		ベルケマン	
サイズ	S M L	肌	
2個入り/左右別		I23-01	
ハンマートゥによる圧迫痛・治療等		PO	
足指の線に沿って適度な圧迫を加えます			

トゥレギュレータ#8157		ベルケマン	
サイズ	フリーサイズ	肌	
1個入り			
タコ・マメ等の痛みの緩和		PO	
フォームラバーのクッションが痛みを和らげます（2指掛用）			



フオアフットアーチバンダー #6002		ベルケマン	
サイズ	S M L XL	ページュ	
1足入り		I23-08	
甲回り	16~19 20~21 22~23 24~25		
cm			
扁平足・横軸アーチの支持等		PO	
伸縮生地サポーターとメタルザルパッドの組み合わせ（前方タイプ）			

ナイトスプリント		バウアー	
サイズ	M L LL	白/ブルー	
左右別			
足サイズ	20~23 23~25 25~28		
cm			
外反母趾の夜間用器具		PO	
弾性強化プラスチック製の夜間用器具です			


フットパターン		仁徳商会	
寸法：約縦 325x 巾 145x 深さ 35mm			
足型採型用の国産フォーム			
1個2ブロック入			
1ケース25個入			



ゲル・トゥースプレッター				シリポス USA
サイズ	S	M	L	ナチュラル
1パック2個入り				I21-01
外反母趾予防とサポートに				PO
シリコンゲルの柔軟性が足指間の摩擦力と刺激を低減します				



ゲル・デジタルパット			シリポスUSA
サイズ	S-M	L-XL	肌/ナチュラル
1パック2個入り			I21-04
ハンマートゥ・タコ・マメ等の痛みの緩和			PO
伸縮生地の裏側のシリコンゲルが圧迫痛を和らげます			

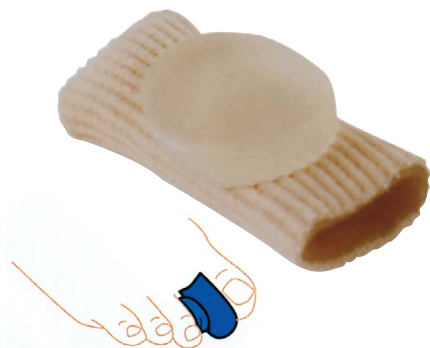

デジタルキャップ ウィズ トゥセパレーター

- ・従来のデジタルキャップにゲルトゥセパレーター機能を付けました。
- ・内部全てにミネラルオイルゲルが付いています。
- ・圧迫や摩擦による痛みを軽減します。
- ・複合した痛みへの対処に向きます。

品番	サイズ	個数
1596	L/XL	2個/pkg



ゲルトゥクレスト

- ・ハンマートゥ、クロウトゥ、マレットトゥによる痛みを軽減します。
- ・シリコンゲルが使用されており、耐衝撃性と耐久性に優れています。
- ・指に装着する部分が補強されています。
- ・フォームとは異なり潰れません。

サイズ/左右別	個数
S 女性向き	1個
L 男性向き	1個
S 女性向き	3個
L 男性向き	3個

※シリポス製品の在庫についてはお問い合わせください



オールジェルデジタルキャップ

- ・ 圧迫や摩擦による痛みを軽減します。
- ・ 乾燥による爪や皮膚のトラブルを軽減します。
- ・ うおの目、マメ、深爪等による不快感を軽減します。
- ・ サンダルやオープントゥシューズに向きます。

品番	サイズ	個数
10495	S/M	2個/pkg
10505	L/XL	2個/pkg

デジタルキャップ



- ・ 内部全てにミネラルオイルが付いています。
- ・ 圧迫や摩擦による痛みを軽減します。
- ・ 乾燥による爪や皮膚のトラブルを軽減します。
- ・ うおの目、マメ、深爪等による不快感を軽減します。
- ・ カットして使用することもできます。



リブ織りメリヤス生地

品番	サイズ	個数
10195	ミニ	6個/pkg
10205	S/M	6個/pkg
10206	L/XL	6個/pkg




メッシュ生地 (より強い圧力用)

品番	サイズ	個数
10235	S/M	8個/pkg



ジェルチュービング

- ・ 前面にミネラルオイルジェルが付いています。
- ・ 任意のサイズにカットできます。
- ・ かさ張りません。
- ・ 癒痕組織の軽減の助けになります。

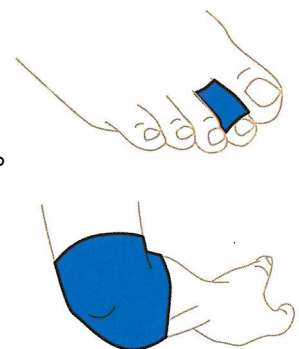

うね織り生地

品番	内径	直径	長さ	個数
10865	9mm	2cm	15cm	2個
10875	15mm	2.5cm	15cm	2個



メッシュ生地 (より強い圧力用)

品番	内径	直径	長さ	個数
10855	9mm	2cm	15cm	3個
10845	15mm	7.6cm	25.4cm	1個

※シリポス製品の在庫についてはお問い合わせください



取寄せ

ノースリップ・バディースペーサー

- ・母趾と第2趾の間に隙間をつくります。
- ・母趾と第2趾に通して使用します。
- ・重なった指やバニオンの軽減に向きます。
- ・ゲルがクッションとなり圧力や摩擦を吸収します。
- ・低アレルギー性 ラテックスフリー
- ・1サイズ 4ヶ入り

品番	サイズ	個数
92824	1サイズ	4個



取寄せ

ノースリップ・リトルバディースペーサー

- ・第4趾と小趾の間に隙間をつくります。
- ・第4趾と小趾に通して使用します。
- ・重なった指やバニオンの軽減に向きます。
- ・ゲルがクッションとなり圧力や摩擦を吸収します。
- ・低アレルギー性 ラテックスフリー
- ・1サイズ 4ヶ入り

品番	サイズ	個数
92830	1サイズ	4個



取寄せ

バニオンガード・ウィズバディースペーサー

- ・バニオンを直接保護し、母趾と第2趾の間に隙間をつくります。
- ・母趾と第2趾に通して使用します。
- ・重なった指やバニオンの軽減に向きます。
- ・ゲルがクッションとなり圧力や摩擦を吸収します。
- ・低アレルギー性 ラテックスフリー
- ・1サイズ 1ヶ入り

品番	サイズ	個数
92833	1サイズ	1個

※シリポス製品の在庫についてはお問い合わせください



バニオンケアゲルスリーブ

- ・外反母趾の痛みを軽減する解剖学的な形です。
- ・ミネラルオイルゲルのパットにより圧迫や摩擦が軽減します。
- ・術後の傷跡の痛みが軽減します。

品番	サイズ		個数
10325	S/M	女性向き	1個
10335	L/XL	男性向き	1個



ゲルバニオン


- ・外反母趾の痛みを軽減する解剖学的な形です。
- ・ミネラルオイルゲルのパットにより圧迫や摩擦が軽減します。
- ・術後の傷跡の痛みが軽減します。



品番	サイズ	個数
10085	1サイズ	5個

スリム ゲルバニオンスリーブ


- ・バニオンケアゲルスリーブのロープロファイル仕様のものです。
- ・靴の圧迫、摩擦、せん断からバニオンを保護します。
- ・薄くコンパクトなのでドレスシューズを含め履くことができます。

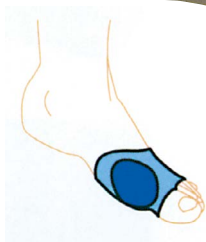

品番	サイズ	個数
1110	S	1個
1111	M	1個

※シリポス製品の在庫についてはお問い合わせください

シリポスジェル製品

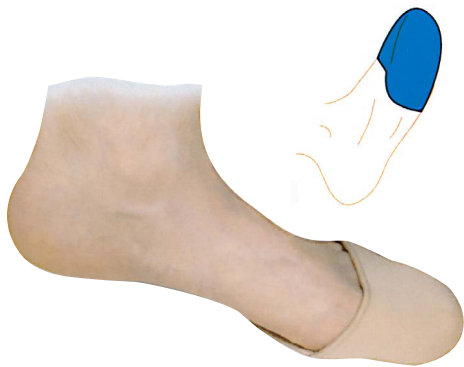

ゲルフットカバー

- ・薄いゲルの層が指先を保護します。
- ・中足骨頭を保護し除圧します。
- ・装着した状態で靴下を履くことができます。
- ・足趾や中足骨ヘストレスがかかるスポーツ等に理想的です。

品番	サイズ		個数
10275	S	9.5cmx12.5cm (巾x長さ)	1ペア
10285	M	10cmx13.5cm (巾x長さ)	1ペア
10295	L	11cmx15cm (巾x長さ)	1ペア



ユニバーサルゲルストラップ

- ・内部のミネラルオイルゲルが全ての中足骨頭にあたります。
- ・前足部の痛みや不快感を軽減します。
- ・衰えた前足部の軟部組織の補強としても使用できます。

品番	サイズ		個数
10155	S/M	女性向き	1ペア
10165	L/XL	男性向き	1ペア



ゲルメタターザルパッド

- ・前足部の衝撃を吸収し分散します。
- ・快適性を重視した解剖学的な形です。
- ・中足骨頭のヒリヒリした痛みを軽減します。
- ・モートン病、中足骨頭痛、軟部組織の補強に最適です。
- ・シリコン性で耐久性が高くなっております。

品番	サイズ	個数
10465	1サイズ	1ペア

ゲルスクウェア

- ・圧迫や摩擦による不快感を軽減します。
- ・厚さ3mm、10mm角の正方形です。
- ・任意のサイズにカットすることができます。
- ・ミネラルオイルが皮膚に潤いを与えます。
- ・皮膚と装具のインターフェースとして使用できます。



品番	サイズ	個数
15505	自己溶着性あり	2枚
15515	裏地なし	2枚

※シリポス製品の在庫についてはお問い合わせください

NS インソール半製品




コスト削減に抜群の効果

靴用中敷の半製品材料としてお使いください。EVA材料の為、モデルに合わせた熱成形が可能です。又、削り加工・接着性も良で価格も非常にリーズナブル。

サイズ	小	中	大
全長	23.0cm	25.0cm	27.0cm

ギー・キャブロン半製品インソール

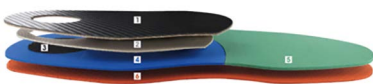

- Thermoflex + Carbon Soft 1.75 mm
renfort et stabilité latéro-latérale
- Thermoflex 1 mm
soutien du médio-pied
- Neosorb 2 mm
absorption de l'onde de choc
- PE 250 2 mm
renfort et stabilité de l'arrière pied
- PR 25 2 mm
protection et restitution d'énergie
- PE color orange MP 1.5 mm
fin, résistant, lavable, limite le glissement du pied

サッカー



- Thermoflex + Cambrière noire 1.90 mm
renfort latéro-latérale
- Thermoflex 1 mm
renfort du médio-pied
- Neosorb 2 mm
absorption de l'onde de choc
- PRX 2 mm
résistant et résistant
- ST Mastic MP 0.8 mm
fin, carboxylés et antistatique

ウォーキング



- Thermoflex + cambrière noire 1.9 mm
renfort et stabilité latéro-latérale
- Thermoflex 1 mm
soutien du médio-pied
- Neosorb 2 mm
absorption de l'onde de choc
- PRX 2 mm
renfort et stabilité de l'arrière pied
- PR 25 2 mm
protection et restitution d'énergie
- PE color bleu MP 2.5 mm
résistant, lavable, limite le glissement du pied

マルチスポーツ

特長

■ギー・キャブロンインソールシステムは、症状・用途・靴の種類により様々な種類があり、どれもが3D設計されていますのでサイズを選択するだけで積層、切削加工等にかかる時間を大幅に削減することが可能です。

■キャブロン社のノウハウにより、最適な材料選択、複雑な組み合わせの積層がほどこされており、様々な症状・用途・靴に対応可能となっています。

※複合素材商品は通常のオープンで加熱した場合、フォーム素材が縮む場合がございますのでご注意ください。

※キャブロン社専用オープンは今現在製造中止となっております。

※熱溶着性芯材が使われている製品（マルチスポーツなど）は加熱後、必ず吸引成形で成形してください。

仁徳在庫品

商品名	サイズ (EU サイズ 2 刻み)	特徴
マルチスポーツ	35 ~ 47	安定性と快適性を両立する様々なスポーツ疾患用
サッカー	35 ~ 47	薄さと硬さを兼ね揃える、スパイク靴用
ウォーキング	男性用：37 ~ 47 女性用：35 ~ 41	安定性と快適性を両立し、様々な足疾患に対応
ビジネスシューズ	39 ~ 47	薄さとしなやかさがあがりながら曲げ疲労に強い
パンプス	35 ~ 41	薄さとしなやかさがあがりながら曲げ疲労に強い
ポトライガー	男性用：37 ~ 47 女性用：35 ~ 41	硬めの素材で足疾患の矯正

サイズ目安 (靴サイズ)

ヨーロッパ	35	37	39	41	43	45	47
日本 (cm) 男性		~ 23	24 - 24.5	25.5	26.5	27.5	28.5
日本 (cm) 女性	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5		

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。

株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17
TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161
FAX: 06 (6691) 7087
<http://www.nintoku.co.jp>
nintoku@nintoku.co.jp