

ORTHO SIS



肘・手首・手部

装具部品・半製品サポーター

Elbow

Digiti manus & Arch

Nintoku Corp



肘関節用サポーター 2 (エルボーサポート 2)		日本シグマックス
肘関節のサポート 両側にフィット性を高める樹脂ステッパー 装着が簡単、調節もスムーズなセミクロードタイプ		PO
左右兼用	肘頭から 12cm 上の腕周り※	
S	19 ～ 22cm	
M	22 ～ 25cm	
L	25 ～ 28cm	
LL	28 ～ 31cm	
3L	31 ～ 34cm	

※腕の力を抜いた状態で計測してください



肘関節用サポーター 3 (エルボーサポート 3)		日本シグマックス
肘関節のサポート 両側に肘関節をしっかりサポートするアルミヒンジ入 装着が簡単、調節もスムーズなセミクロードタイプ		PO
左右兼用	肘頭から 12cm 上の腕周り※	
S	19 ～ 22cm	
M	22 ～ 25cm	
L	25 ～ 28cm	
LL	28 ～ 31cm	
3L	31 ～ 34cm	

※腕の力を抜いた状態で計測してください

【別売品】過伸展防止ストラップ



●過伸展防止ストラップを使用することにより、肘関節の過伸展を制御します。

種類 (左右兼用)	適用サイズ
ショート	本体 S・M・L 使用時
ロング	本体 L・3L 使用時

【別売品】側方安定ストラップ



●過伸展防止ストラップを使用することにより、肘関節の過伸展を制御します。

種類 (左右兼用)	適用サイズ
S - M	本体 S・M 使用時
L - LL	本体 L・LL 使用時
3L	本体 3L 使用時



肘サポーター (別注赤ライン)		アクト
通気性のある穴あきネオプレン素材 装着がしやすいセミスリーブタイプ 両側に樹脂スパイラルステー内臓 ベルトに伸縮マジックを使用し良好なフィット性 スポーティーな別注オリジナルカラー赤ライン		PO
左右兼用	肘頭の周径 (腕を伸ばした状態)	
S	22 ～ 26cm	
M	24 ～ 28cm	
L	26 ～ 30cm	
LL	28 ～ 32cm	



ヘックスエルボーブレース		シラック
可動域の制限により過伸展を防ぐ 【角度制限】 伸展: 0° 10° 20° 30° 40° 屈曲: 45° 60° 75° 90° 両サイドに2軸ステー 上腕部はオープン型、前腕部はスリーブ型 <適応症例> 内外側側副靱帯断裂、肘関節脱臼／亜脱臼時の固定 野球肘術後 等		PO
左右兼用	肘頭の周径 (腕を伸ばした状態)	
S	22 ～ 26cm	
M	24 ～ 28cm	
L	26 ～ 30cm	
LL	28 ～ 32cm	



テレスコープエルボー		シラック
ワンタッチで-10°～100°の間でロック可能 簡単に-10°～110°の間で可動域制限可能 (10°刻み) 長さ調節可能な支柱 手曲げ加工可能なカフ <適応症例> 上腕骨／尺骨／橈骨 骨折 内外側側副靱帯断裂 肘関節脱臼／亜脱臼時の固定		PO
左右別	フリーサイズ	

<掲載終了品>

※ (パワー) エピトレインは取り扱い終了しました。


テニス肘用サポーター／NinToku



テニスエルボーサポーター	アルケア
フリーサイズ（前腕周囲 20～27cm）	ブルー or ブラック
本体寸法： 3cm 巾 × 40cm	1箱5個入（バラ売り可）
上腕骨外側上顆炎 上腕骨内側上顆炎 等	併売 19821 19841
パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保持。 リングを通して止めるだけで、簡便に装着。	



テニスエルボーバンド	アルケア
フリーサイズ（前腕周囲 20～30cm）	黒
本体寸法： 5cm 巾 × 35cm	1箱5個入（バラ売り可）
上腕骨外側上顆炎 上腕骨内側上顆炎 等	併売 19841
幅広バンドにより手関節伸張筋群を的確に圧迫。 伸縮素材と非伸縮素材でズレを低減。 リングを通して止めるだけで、簡便に装着。	

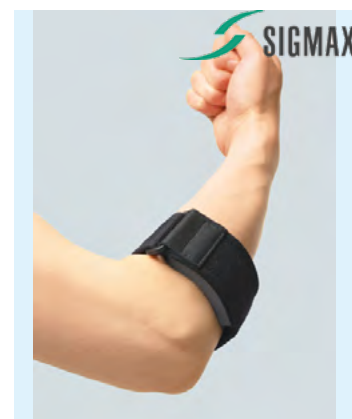

ファシリエイドサポーター肘	日本シグマックス
フリーサイズ	黒
前腕周径：19～31cm	1箱5個入（バラ売り可）
上腕骨外側上顆炎 上腕骨内側上顆炎 等	併売
適度な硬さを持つエルボーパッドにより、腱付着部を適度に圧迫。ループ形状にした本体に腕を通してとめるだけで、片手で簡単に装着可能。	



エビ フォルサ プラス	オットーボック
フリーサイズ 左右兼用	黒
肘周径： 23 - 31 cm	
上腕骨外側上顆炎 上腕骨内側上顆炎 等	PO 50A3
解剖学的形状のパッドで的確な圧迫が可能	



テニスエルボーストラップ	シラック
XS S M L XL	黒
20-23 23-25 25-28 28-30 30-36	前腕の最大周径 cm
上腕骨外側上顆炎 上腕骨内側上顆炎 等	PO
患部を圧迫する広パッドを内側にセット 耐久性のある弾性素材 スリーブ状でストラップ調整がしやすい	

保温用肘サポーター／NinToku



ウールサポーター 肘	日本シグマックス
ひじ S ひじ M ひじ L	白
20-25cm 23-30cm 30-40cm	肘頭から 10cm 上の周囲
関節の保温・圧迫	併売
縦横両方向に伸縮するため患部にやさしくフィット。 ウール混紡。ラテックスフリー	

<掲載終了品>


※（アルケア）保温シームレスサポーターは製造終了しました。
※（シグマ）シームレスサポーターは製造終了しました

ロングタイプ

手関節装具・サポーター／NinToku



リスト Z					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	白
	16 - 19	18 - 20	19 - 22	23 - 24	MP 周径での目安 (cm)
手根管症候群 橈骨神経麻痺 など					PO 520N
ベルトレスのため着脱が容易。ADL を妨げないシンプルなデザイン。水洗いが容易。熱処理による調整が可能。					

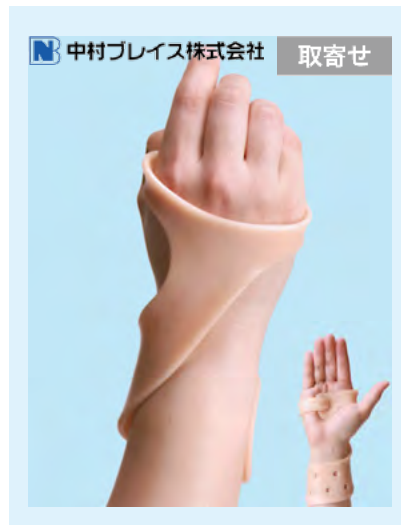


パワフルリスト Z					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	ベージュ
	16 - 19	18 - 20	19 - 22	23 - 24	MP 周径での目安 (cm)
手根管症候群 橈骨神経麻痺 など					PO 523N
リスト Z に中手骨バーを追加。中手骨の生理的アライメントが保たれ支持性と装着感が向上。					



NB リスト / NB リスト尺側支柱付					中村ブレイス
左右別	S	M	L	LL	黒
	16 - 19	18 - 20	19 - 22	23 - 24	MP 周径での目安 (cm)
手根管症候群 橈骨神経麻痺 橈骨遠位端骨折 など					PO 540N/541N
掌側・背側にアルミ支柱を配置。手掌部のシリコーンパッドが中手骨のアライメントを支持。541N は尺側にもアルミ支柱を追加。					



コックアップリスト DP2					シラック
左右別	XS-S	M-L	XL-XXL		黒
	10 - 15	15 - 20	20 - 25	手首周径 (cm)	
手根管症候群、手首捻挫 ギプス後の固定、滑液包炎 等					PO
高強度アルミスチーを使用し掌屈 / 背屈制限 柔らかく吸水性のあるマイクロフリース素材 DP3 より 4cm 短いショートタイプ					

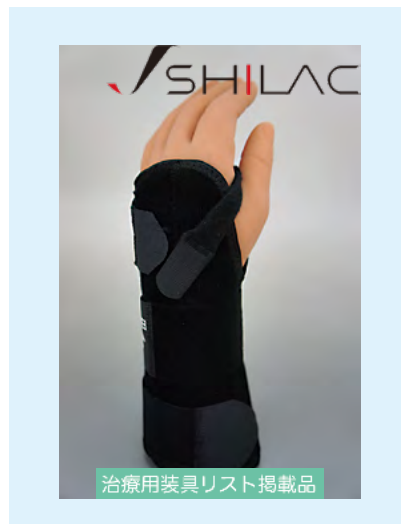

コックアップリスト DP3					シラック
左右別	XS-S	M-L	XL-XXL		黒
	10 - 15	15 - 20	20 - 25	手首周径 (cm)	
手根管症候群、手首捻挫 ギプス後の固定、滑液包炎 等					PO
高強度アルミスチーを使用し掌屈 / 背屈制限 柔らかく吸水性のあるマイクロフリース素材 DP2 より 4cm 長く固定力 UP					



パームスプリント					シラック
左右兼用	S (1)	L (2)			
	14 - 18	18 - 22	手首周径 (cm)		
TFCC 損傷、手根管症候群 手首捻挫、ギプス後の固定 等					PO
3 層でも熱や汗を発散させ肌触りの良い素材 尺屈可動制限 アルミスチー取り外し可能					

SIGMAX



手関節固定装具ロング (リストサポート2ロング)				日本シグマックス
左右別	S	M	L	ベージュ／黒
	125 ～ 145	145 ～ 165	165 ～ 190	手首周径 (cm)
手根管症候群、TFCC 損傷、腱鞘炎、 ギプス除去後の固定 等 手関節及び前腕部の固定に、				PO
ソフトな肌触りで良好なフィット感。掌側、甲側のアルミステーでしっかり固定。汚れても丸ごと洗濯可能。				

ottobock.



マニユ 3D ベーシス						オットーボック
XS	S	M	L	XL	XXL	黒
14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18.5	18.5 - 20	20 - 22	手首周径 (cm) 左右別
手関節・前腕部の保持						PO
						4143
掌側にプラスチックステー内臓 (17cm) 拇指の動きを考慮した拇指の調整ループ付き 伸縮性、通気性に優れた生地						

ottobock.



マニユアレクサ			オットーボック
S	M	L	黒
14 - 16	16 - 19	19 - 22	手首周径 (cm) 左右兼用
手関節・前腕部の保持			PO
			50P20
掌側・背側にアルミステー内臓 (合計 2 本付属) 筒形構造。Pull-2-Go タブで簡単装着 尺側にもステー用ポケット付			

ottobock.



取寄せ

マニユインモビル	オットーボック
フリーサイズ	黒
	左右兼用
手関節背屈位保持	PO
	50P10
手関節を 10 ～ 20° 背屈位に保持 軽量の硬質発泡素材を使用	

ottobock.



取寄せ

マニユインモビルロング		オットーボック
M	L	黒
～ 18 cm	18 cm ～	手掌の長さ 左右兼用
手関節背屈位保持 手指関節の保持		PO
		50P11
指先までである支持体 手関節を 10 ～ 20° 背屈位に保持 軽量の硬質発泡素材を使用		

取寄せ

SELECTION



セレクションリストサポートソフト						田沢製作所
XS	S	M	L	XL	XXL	黒
- 11	11 - 14	14 - 17	17 - 20	20 - 23	23 - 26	手首周径 (cm) 左右別
手関節炎、関節リュウマチ 等						PO
						35204
手掌・甲のプラスチックステーが手関節をしっかり固定。グローブをはめるように簡単装着。 ソフトタイプは拇指関節の動きを妨げない。						

ショートタイプ

手関節装具・サポーター／NinToku



手関節固定装具ショート (リストサポート2)					日本シグマックス
左右別	S	M	L	ベージュ／黒	
	12.5 ～ 14.5	14.5 ～ 16.5	16.5 ～ 19.0	手首周径 (cm)	
手根管症候群、TFCC 損傷、腱鞘炎 等 手関節の固定に。					PO
ソフトな肌触りで良好なフィット感。掌側、甲側のアルミステーでしっかり固定。汚れても丸ごと洗濯可能。					



マニユカレッツァ	オットーボック
フリーサイズ	黒
(手首周径 14～22cm)	左右兼用
不安定性、舟状骨偽関節 等の手 関節の保持	PO 50P70
拇指をループに通して、手首に巻き付けるだけの 簡単装着。通気性の良い3層素材。 フィギュアエイト機能で手関節を安定させる。	



ブーメランリスト	シラック
フリーサイズ	黒
	左右兼用
関節リウマチ 手根管症候群 手関節腱鞘炎 等	PO
軽いサポートと適度な圧迫 肌を快適に保つマイクロフリース素材	



リストラップ・TFCC	アルケア
S - M	L - LL
13 - 16 cm	16 - 19 cm
手首周径 左右兼用	
TFCC(三角繊維軟骨複合体) 周辺を 保護	併売
把持動作を妨げず、遠位橈尺関節をサポート 母指ループにより片手でも装着しやすい 手関節の尺屈、背屈を制限	



マニジュニア			オットーボック
S	M	L	黒
9 - 11	11 - 13	13 - 15	手首周径 (cm) 左右別
手根管症候群、不安定性、腱鞘炎、リウマチ、靱帯損傷、下垂手、舟状骨偽関節、インピンジメント症候群 等			PO
			50P50
手関節・前腕部の保持。 掌側に曲げ加工可能なアルミステー内臓。 子供にも操作しやすいためのストラップ。			



マニジュニアボレックス			オットーボック
S	M	L	黒
9 - 11	11 - 13	13 - 15	手首周径 (cm) 左右別
手根管症候群、不安定性、腱鞘炎、リウマチ、靱帯損傷、下垂手、舟状骨偽関節、CM 関節の炎症、インピンジメント症候群 等			PO
			50P51
掌側に曲げ加工可能なアルミステー内臓子供にも操作しやすいためのストラップ拇指の過外転を防ぐ形状。			

<掲載終了品>

※ (アルケア) リストケア・プロは取り扱い終了しました。

母指 CM 関節装具・サポーター／NinToku



母指固定装具 P.O. サムレスト			日本シグマックス
S	M	L	ページ・黒
125 - 145	145 - 165	165 - 190	手首周囲 cm
50 - 60	55 - 60	60 - 75	母指周囲
母指 CM 関節のサポート、安静保持			PO
			左右兼用
手を通してストラップを止める簡単装着設計。装着感の良いソフトな素材。丸ごと洗濯可能。芯材には独自の形状にした樹脂スチーを使用。			



Push CMC					有園製作所
左右別	0	1	2	3	
	150 ~ 175	175 ~ 195	195 ~ 225	225 ~ 270	MP 関節の周囲 (cm)
変形性 CM 関節症					PO
第一中手骨を支持して機能的肢位を保持。拇指球部分のプレートは形状修正可能。					



セレクションサムサポートリジッド					田沢製作所
XS	S	M	L	XL	ページ
- 13	13 - 15	15 - 17	17 - 20	20 -	手首周囲 (cm) 左右別
CM 関節のリュウマチ性関節炎、関節リュウマチ、外傷後、炎症 等					PO
疼痛を緩和し CM 関節を安定させます。					35203

ottobock.



リゾアレクサ			オットーボック
左右兼用	S	M	黒
	14 ~ 18	18 ~ 22	手首周囲 cm
不安定性、手根管症候群、腱鞘炎、捻挫、脱臼・亜脱臼、靱帯損傷、母指対立筋麻痺 等の CM 関節の保持			PO
曲げ加工可能な 2 本のアルミステール内蔵。通気性の良い 3 層構造の素材。			50P22

ottobock.



治療用装具リスト掲載品

サムフォーム ロング						オットーボック
左右別	SS	S	M	L	LL	ブルー
	13 ~ 14	14 ~ 16	16 ~ 18	18 ~ 22	20 ~ 22	手首周径 cm
不安定性、手根管症候群、腱鞘炎、捻挫、脱臼・亜脱臼 等の CM 関節・手関節の保持						PO 4085
お湯で手の形状に成型可能なプラスチックシートを母指部ポケットに内蔵し CM 関節の強い支持性。本体は伸縮性と保温性に優れたネオプレン素材。						



サムスパイカリスト 1			シラック
XS - M	L - XXL	左右兼用	黒
8 - 11 cm	11 - 14 cm	親指の長さ	
CM 関節症、手根管症候群、手関節腱鞘炎、ドケルバン病			PO
肌を快適に保つマイクロフリース素材。シンプルで締めやすい構造。高強度アルミステールで優れた固定力。2 サイズ展開			

中村ブレイス株式会社



治療用装具リスト掲載品

CM バンド						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	透明
	4.6 ~ 5.1	5.1 ~ 5.7	5.7 ~ 6.2	6.2 ~ 6.7	6.7 ~ 7.3	母指 IP 関節の周径 (cm)
変形性 CM 関節症、慢性関節リウマチ、腱鞘炎 など						PO
						505N
熱処理による本体形状の微調整可能。水洗い可。 ※ SS サイズは取寄せになります。						

中村ブレイス株式会社



治療用装具リスト掲載品

CM シリコン						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	4.6 ~ 5.1	5.1 ~ 5.7	5.7 ~ 6.2	6.2 ~ 6.7	6.7 ~ 7.3	母指 IP 関節の周径 (cm)
変形性 CM 関節症、慢性関節リウマチ、腱鞘炎 など						PO 503N
ソフトな装着感、耐熱性耐寒性に優れる。水洗い可 ※ SS サイズは取寄せになります。						

中村ブレイス株式会社



治療用装具リスト掲載品

CM シリコンハード						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	ページ
	4.6 ~ 5.1	5.1 ~ 5.7	5.7 ~ 6.2	6.2 ~ 6.7	6.7 ~ 7.3	母指 IP 関節の周径 (cm)
変形性 CM 関節症、慢性関節リウマチ、腱鞘炎 など						PO 507N
CM バンドと同等の硬さ、耐熱性耐寒性に優れる、水洗い可。 ※ SS サイズは取寄せになります。						



PO 専用 CM サポート・NS



PO 専用 CM サポート・NS			仁徳商会
左右別	スモール	レギュラー	ページュ・黒
	一般女性	一般男性	サイズ目安
CM 関節炎・手関節腱鞘炎 慢性関節リウマチ 等			PO 専用
本体は通気性の良いエアスルー素材。拇指部にプラスチックステアーを内蔵し固定力アップさせながら日常生活に支障が出にくい設計。			



PO 専用 CM サポート・NS ロング			仁徳商会
左右別	スモール	レギュラー	ページュ・黒
	一般女性	一般男性	サイズ目安
CM 関節炎・手関節腱鞘炎 慢性関節リウマチ 等			PO 専用
ショートタイプ (CM サポート NS) よりプラスチックステアー及び本体を 3cm 延長し、適度に手首を固定・圧迫。			



ロングタイプ

ショートタイプ

<特徴>



① 拇指調節ベルトで装着性・サイズをカバー



② プラスチック補強材をベルトで巻き込むことにより、抜群の可動域制御



③ 仮止めマジックにより装着性を UP

SmartFab シリーズ

CM-rest

シー・エム・レスト

オーダーメイド用成形部品

株式会社 トクダ オルソ テック

CM-rest

トクダオルソテック

特徴① 優れた拇指 CM 関節制御手法

装具手掌部は母指 IP ～第 5 中手骨まであり、母指対立位や内転位を制御します。また、装具背側部は母指 CM 関節部まで覆うことで背側脱臼位を制御します。

特徴② 優れたフィッティング手法

関節運動を制御する要素は硬く、トリミングライン周りは柔らかい仕様となっているため、硬性でありながら優れた装着感を実現します。

特徴③ 効率的で環境にやさしい製造手法

本製品をオープンで加熱し、採型した陽性モデルへ成形することで、いつでも均質な製造が可能です。また、トリミングも必要に応じて最小限行うだけであり、効率的で環境にもやさしい製造手法です。

※本製品は熱可塑性素材のオーダーメイド用成形部品材料のため、ベルト・パッドは付属しておりません (左写真は取付時のイメージ)

左右別	MP 部周径 (サイズが跨る場合は大きい方推奨)
XS	16.5 ～ 17.5cm
S	18.0 ～ 19.0cm
M	19.5 ～ 21.0cm
L	21.5 ～ 23.5cm



母指 CM+ 手関節固定装具／ NinToku



治療用装具リスト掲載品

母指手関節固定装具 (P.O. サムスパイカ)				日本シグマックス
左右別	S	M	L	ページ
	125 ~ 145	145 ~ 165	165 ~ 190	手首周径 (cm)
母指 CM 関節、母指の内転、外転及び手関節の背屈、掌屈の動きを制限し、母指・手関節をサポートし安静保持				PO
把持運動を妨げず日常生活を考慮した形状。掌側と甲側のアルミステールで支持力をアップ。母指部分にはオリジナル樹脂ステールで強度アップ。				



サムスパイカリスト 2			シラック
XS-S	M-L	XL-XXL	左右別 黒
10 - 15	15 - 20	20 - 25	手首周径 (cm)
CM 関節症、手根管症候群、手関節腱鞘炎、ドケルバン病			PO
肌を快適に保つマイクロフリース素材。シンプルで締めやすい構造。高強度アルミステールで優れた固定力。			




取寄せ

セレクションリストサポートリジッド						田沢製作所
XS	S	M	L	XL	XXL	黒
- 11	11 - 14	14 - 17	17 - 20	20 - 23	23 - 26	手首周径 (cm) 左右別
手関節炎、関節リュウマチ、ギプス除去後の固定 等						PO
手掌・甲のプラスチックステールが手関節をしっかり固定。グローブをはめるように簡単装着。リジッドタイプは母指関節まで固定。						35206



ottobock.

マニユアレキサボレックス				オットーボック
S	M	L	黒	
14 - 16	16 - 19	19 - 22	手首周径 (cm) 左右兼用	
捻挫、リウマチ、靱帯損傷、下垂手、腕遠位端・手根骨骨折、夜間固定、前腕部の保持				PO
				50P21
掌側、背側に曲げ加工可能なアルミステール、母指部にスパイラルステール内蔵。筒型構造。Pull-2-Go タブで簡単装着。				

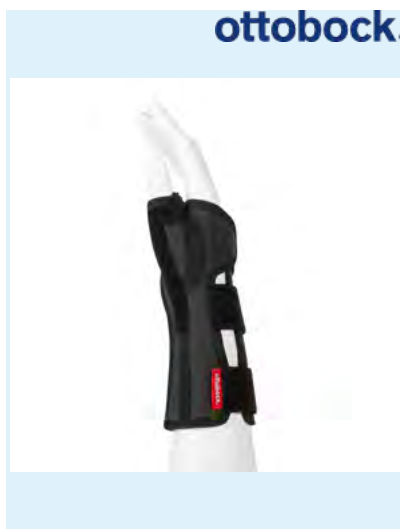

ottobock.

マニユ 3D ボレックス						オットーボック
XS	S	M	L	XL	XXL	黒
14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18.5	18.5 - 20	20 - 22	手首周径 (cm) 左右別
変形性手関節、腱鞘炎、捻挫、脱臼・亜脱臼、ドケルバン病、スキーヤーズサム等の CM 関節、手関節、前腕部の保持						PO
掌側にプラスチックステール内蔵、母指部にスパイラルステール内蔵。伸縮性・通気性に優れた生地。						4146




ナックルスプリント



特徴：

- ・ MP 関節を 90 度に固定し、高い整復位保持が可能
- ・ 腫脹や疼痛に応じて調整可能
- ・ 洗浄可能素材で衛生的

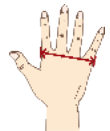

左右別	MP 関節における手の幅
M	80mm 以下
L	80 ～ 90mm



セレクション尺側偏位用装具				田沢製作所
XS	S	M	L	黒
13 - 16	16 - 19	19 - 22	22 - 25	MCP 周径 (cm) 左右別
関節リュウマチなどの炎症性疾患や編成疾患で尺側偏位を生じているケース、過剰運動症候群や筋力低下時のサポート、独自の3層構造のセレクション生地使用、薄く、手の形状に沿ったデザイン、生地はほつれることなくトリミング可能。				PO 35218



中手ブレース				ガルベストーン
S	M	L	XL	左右兼用
57 - 76	76 - 89	89 - 102	102 -	MP 関節の手の巾 (mm)
中手骨骨折 等				PO
移動可能な調節式パッドで第2～5中手骨に対応、指と手首に干渉しないデザイン、ベルクロストラップで状態に応じて調節可能。				




ウールサポーター		日本シグマックス
①手首	②手のひら	左右兼用
フリー (2 枚入)	フリー (1 枚入)	
保温		併売
適切な伸縮性と快適なフィット性、ウールの特製である保温性と通気性を最大限に生かしました。		

<掲載終了品>

- ※ (アルケア) 保温シームレスサポーターは製造終了しました。
- ※ (シグマ) シームレスサポーターは製造終了しました




NS マレット 〈角度付〉

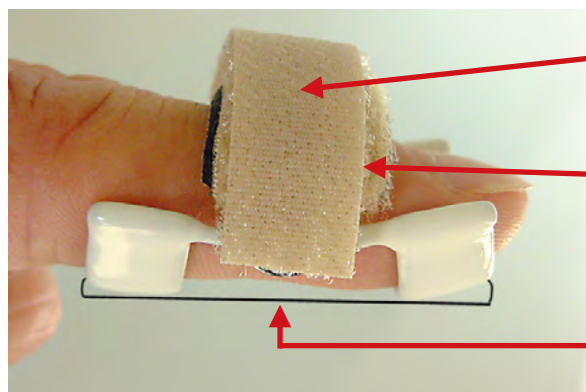

押さえ部分のマジック幅を 3mm 広げました。

押さえ部分の内張りをネオプレンに変更
脱着式で洗い替えをつけました。

伸展角度を約 20 度つけました。

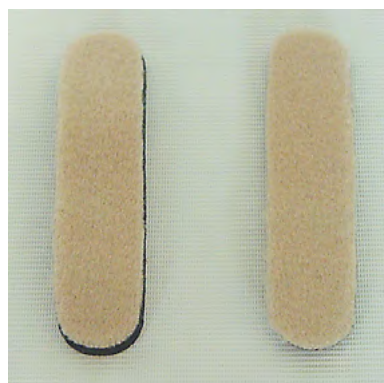

脱着式ネオプレン内張り

- ・マジック幅を広げたことで患部への圧迫を和らげ、より固定力が増しました。
- ・脱着可能な材^①内張りにした事で、ソフト感はそのままだに水仕事等での不快感を減少させました。
- ・内張りの洗い替えによって清潔感を保持させることが出来ました。


サイズ	バネ長さ	適用範囲 (目安)
SS	30mm	一般女性 第4・5指
S	35mm	一般女性 第2・3指 一般男性 第4・5指
M	40mm	一般女性 第1・2指 一般男性 第2・3指
L	45mm	一般女性 第1指 一般男性 第1～4指

(松本) マレットフィンガースプリント



コイルバネにより持続した矯正を加えられます。
*曲げ伸ばし動作を続けると支柱折れの原因となりますので
ご注意ください。

サイズ (単位: mm)	A	B	C
LL	47	31	27
L	43	28	25
M	39	26	23
S	33	24	22
SS	28	22	20
3S	27	19	18

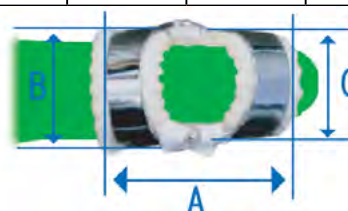

ジョイントジャック



PIP 関節の屈曲拘縮に対し、ネジを締めることによって安定した力を段階的に加えることができます。

S	3.8 ~ 6.4cm
M	5.1 ~ 7.6cm
L	7.6 ~ 10.2cm


MP 関節から爪床の中程度までの長さを測定してください

(松本) カペナスプリント



サイズ (単位: mm)	A	B	C
LL	33	85	32
L	32	73	30
M	28	65	26
S	27	56	24
SS(0.5)	21	42	20
SS(0.4)	19	35	20
S.M.L.LL は線径 0.6・0.8mm 有り			


コイルバネにより持続した矯正を加えられます。
*曲げ伸ばし動作を続けると支柱折れの原因となりますのでご注意ください。

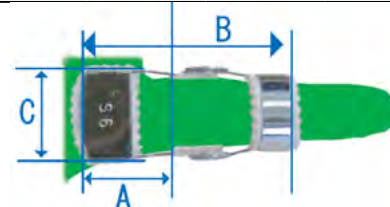


リングメイト ML-1



※令和7年度より完成用部品から削除されました。

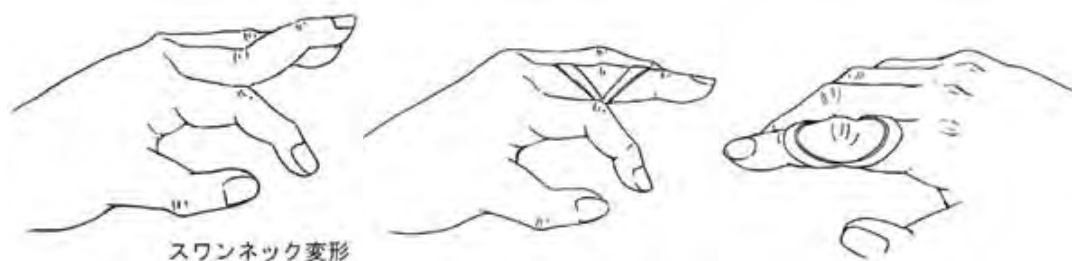

- ・ 指関節 (PIP) の過伸展を制限し適正な矯正位を保ちます。スワンネック変形などに有効です。
- ・ 関節の屈曲を制限しない機能的なスプリントです。
- ・ 個々の症例に応じて義肢装具士が適切なサイズを選択します。サイズは指輪の号数で表示されています。(全 23 サイズ)
- ・ 材質は銀合金ロジウムメッキ製です (仕上げ: ツヤ有 / 無 選択可能)

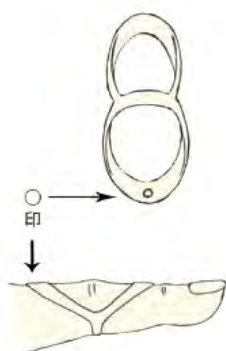

本製品は2つのリングのうち、○印の付いた方のリングが他方のリングより大きくなっています。

○印の付いたリングを指の近位にくるようにし、PIP 関節を軽く曲げた状態で装着してください。

ご注文方法：

採寸セットの貸出 (貸出期限 1 週間 まで)

↓
症状に応じた適切なサイズを選択

↓
注文・採寸セットの返却 (納期約 2 週間)

※採寸用セットは製品と材質が異なります。



アドバンフィット株式会社

ヘバーデン スプリント



品番	サイズ	指周径	重量
A-3701	S ①	38-45 mm	0.7g
A-3702	M ②	45-55 mm	0.9g
A-3703	L ③	55-65 mm	1.5g

* 指周径は中節骨中央部で計測

特長

- ① DIP を軽度固定します
- ② 指作業時の痛みを和らげます
- ③ 純アルミ製なので水回りの作業もできます
- ④ 可塑性が高く、付け外しも簡単です
- ⑤ 要所だけ固定できるのでテーピングよりも蒸れません
- ⑥ 指の形に合わせた調節が容易です

使用方法

- ① ポストのある側が掌面中央に位置させてください。



- ② DIPの中心をまたぐ位置で4本のバーを指の形状に合わせて曲げます。



- ③ 抜け落ちない程度に適合させてください。



SIGMAX

ヘバーデンリング



材質：錫（すず）


特長

- 手指の第一関節に装着して固定することができます
- 手指の太さや変形に合わせて適宜調整することが可能です
- 錫（すず）の「曲がる」という特性を生かした製品です
- 水に濡れてもそのまま使用できます
- 付属のスティックに巻きつけることにより、ある程度元の丸い形に戻すことが可能

使用上の注意事項

- 装着により少しずつ機能が劣化します。1～3ヶ月を目安に新しいリングを購入してください
- なるべく長期間使用いただくため、リングの開閉は必要最低限にしてください
- 本品は錫製の柔らかい素材のため、強固な固定、変形の矯正等ではできません
- 本品装着時に手作業等をした場合、リングが緩くなり外れやすくなる場合がありますので、本品はできるだけ手を安静にできる時にご使用ください


サイズ展開

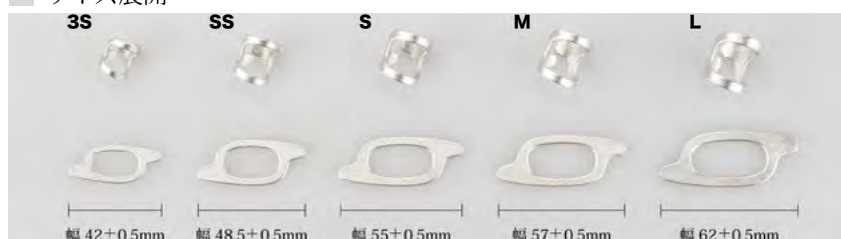

※ 試着を行ってサイズを選んでください

※ 採寸する場合は、DIP 関節周径よりも2～3mm 大きいサイズを推奨

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。

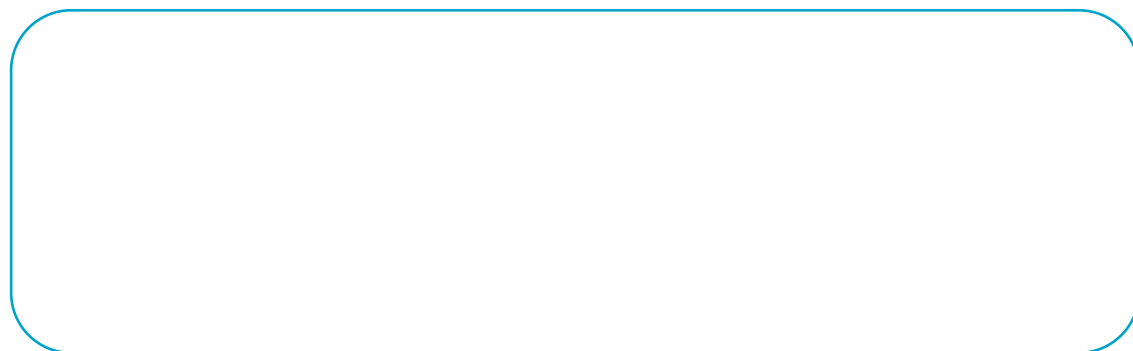

株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17
TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161
FAX: 06 (6691) 7087
<http://www.nintoku.co.jp>
nintoku@nintoku.co.jp



仁徳カタログ PDF データ DL 用